



FWEWBLS

Ferno Walkbelt



FERNO[®]



Brukerinstruksjoner

Dok. ID. 00464-V3 / mai 2023

Ansvarsfraskrivelse

Denne håndboken inneholder generelle instruksjoner for bruk, drift og vedlikehold av dette produktet. Instruksjonene er ikke altomfattende. Sikker og riktig bruk av dette produktet er utelukkende etter brukerens skjønn. Sikkerhetsinformasjon er inkludert som en tjeneste til brukeren. Alle andre sikkerhetstiltak som tas av brukeren bør være innenfor og under hensyntagen til gjeldende forskrifter og lokale protokoller. Opplæring i riktig bruk av dette produktet må gis før du bruker dette produktet i en faktisk situasjon.

Ta vare på denne håndboken for fremtidig referanse. Inkluder den med produktet ved overføring til nye brukere. Ytterligere gratis kopier er tilgjengelig på forespørsel fra Customer Relations.

Merknad om eiendom


Informasjonen som er avslørt i denne håndboken er eiendommen til Ferno Australia Pty Ltd. Ferno Australia Pty Ltd forbeholder seg alle immaterielle rettigheter, proprietære designrettigheter, produksjonsrettigheter, reproduksjonsbruksrettigheter og salgsbruksrettigheter til disse, og til enhver artikkel som er avslørt deri unntatt til i den grad disse rettighetene er uttrykkelig gitt til andre eller der det ikke er aktuelt for leverandørens proprietære deler.

Begrenset garantierklæring

Produktene som selges av Ferno er dekket av en begrenset garanti. De fullstendige vilkårene og betingelsene for den begrensede garantien, og ansvarsbegrensningene og ansvarsfraskrivelsene, er også tilgjengelige på forespørsel ved å kontakte Ferno Australia via e-post:info.au@ferno.com.

Melding om uønsket hendelse

I tilfelle en uønsket hendelse eller alvorlig hendelse relatert til bruken av denne enheten, må sluttbrukeren/operatøren rapportere hendelsen til Ferno Australia, 11 Johnstone Road, Brendale Queensland 4500 Australia, +61 7 3881 4999 eller via e-post til info.au@ferno.com. Hvis hendelsen skjedde i EU, rapporter den til Fernos autoriserte EU-representant og den kompetente myndigheten i medlemsstaten der sluttbrukeren er etablert.



BRUKERHÅNDBOKER

For å be om flere gratis brukermanualer, kontakt Ferno Customer Relations, din Ferno-distributør eller besøk www.ferno.com.au.



Ferno Australia Pty Ltd 11
Johnstone Road, Brendale
Queensland 4500, Australia



Ferno Srl
via B. Zallone, n. 26,
40066 Pieve di Cento, Bologna, Italia
+ 35 051 6860028



Ferno (UK) Limited
Stubs Beck Lane, Cleckheaton West
Yorkshire BD19 4T, Storbritannia
+ 44 1274 851999

**1 - SIKKERHETSINFORMASJON****1.1 Advarsel**

Advarselsmeldinger indikerer en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til personskade eller død.

⚠ ADVARSEL

Benstroppene er ikke designet eller vurdert til å ta hele pasientens vekt. Ikke bruk Walk Belt som løftesele.


1.2 Merknad

Merknader legger vekt på viktig, men ikke farerelatert informasjon. Unnlattelse av å følge merknadene kan føre til produkt- eller eiendomsskade.







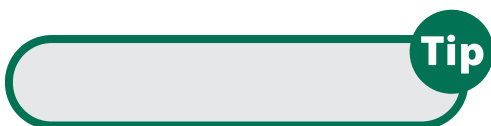





LEGG MERKE TIL

1.3 Tips

Tips gir anbefalinger for enklere bruk av produktet.

**1.5 Symbolordliste**

Symbolene definert nedenfor brukes på gangbeltet og/eller i denne håndboken.

Symbol	Definisjon
	Produktkode
	Serienummer
	Batchnummer
	Produksjonsdato
	Dato for pensjonering / utløp
	Produsent
	Samsvar med EU-standarder
	Samsvar med Storbritannias standarder
	Autorisert representant for Det europeiske fellesskap
	Autorisert representant Storbritannia
	Medisinsk enhet
	Les og oppbevar brukerveiledningen

1.6 Produktidentifikasjonsetikett

Produktidentifikasjonsetiketten inneholder viktig informasjon om produktet, inkludert serienummer, produksjonsdato og pensjonering.



2 - OM GÅREBELTE

Ferno Walk Belt er spesialdesignet for ambulansepersonell og akuttpersonell for å hjelpe pasienter mens de går.

Ferno Walk Belt festes rundt en pasients midje og er utstyrt med åtte håndtak – fire horisontale og fire vertikale håndtak – samt to benstropper som er designet for å styrke Walk Belt når det brukes til å stabilisere ustø pasienter. Gangbeltet reduserer betydelig innsatsen som kreves av operatøren for å hjelpe en pasient mens han går. Ferno Walk Belt kan vaskes i maskin og gjenbrukes gjentatte ganger.

PRODUKTDESIGNASJON:	Stabilitetshjelp. Ikke for fallsikring fra høyde.
GENERELL BRUK:	Forbedrer omsorgspersoners evne til å gi stabilitet til pasienter mens de går
STØRRELSE Midjeomkrets:	FWE-WB-LS (Standard)150 cm /FWE-WB-LS L (stor)180cm



3 - TILPASSE OG BRUKE GÅREBELTE


Montering og bruk av gåbeltet

1. Løsne midjebeltespennen og vikle gangbeltet rundt pasientens midje. Klem spennen sammen, og juster beltestroppen ytterligere slik at gangbeltet passer tett mot pasientens kropp.

Tip

Forhåndstilpass gåbeltet

For å spare tid og redusere ulempen for pasienten, estimer pasientens midjestørrelse og forhåndsjuster gangbeltet før du legger beltet på pasienten.

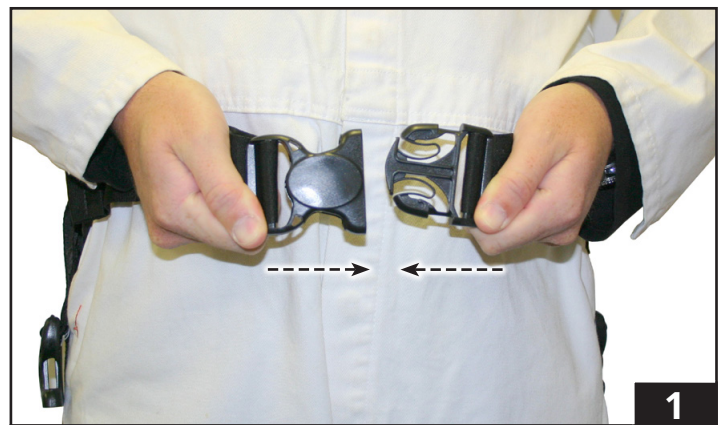


2. Løsne spennen for venstre benstroppen. Vikle den lange venstre benstroppen rundt baksiden av venstre ben til forsiden av benet via lyskeområdet og koble til spennen igjen (figur 2 og 3). Juster stroppene om nødvendig, for en tettstående og komfortabel passform.
3. Gjenta trinn 2 med høyre benstroppen.
4. Når gangbeltet er godt festet til pasienten, kan operatøren bruke alle de vertikale eller horisontale håndtakene (figur 4 og 5) for å hjelpe pasienten mens han går.

LEGG MERKE TIL

Benstroppene må monteres på pasienten dersom pasienten skal flyttes fra enten stående til sittende stilling eller omvendt. Benstroppene er designet for å støtte pasienten under disse manøvrene og holder gangbeltet i sin opprinnelige posisjon.

⚠ ADVARSEL

Benstroppene er ikke designet eller vurdert til å ta hele pasientens vekt. Ikke bruk Walk Belt som løftesele.

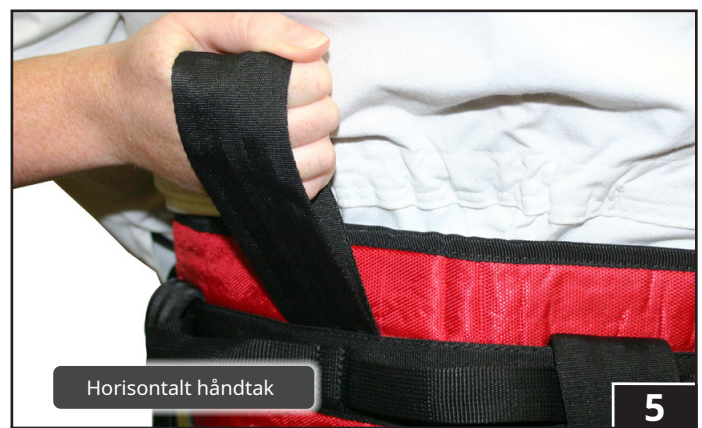

Inspeksjoner

Inspisér gangbeltet for å sikre at det er egnet til bruk før du legger det bort. En inspeksjonssjekkliste er gitt som veiledning. Overvis eventuelle tegn på forringelse til en kompetent eller utpekt person for å avgjøre produktets sikkerhet og brukbarhet.

SJEKKLISTE FOR INSPEKSJON AV GÅREBELTE

WEBBING	Frysing, kutt eller rifter
	Skader på grunn av varme, etsende eller løsemidler
	Foringelse på grunn av råtnende, mugg eller ultrafiolett eksponering
SYING	Ødelagte, kuttete eller slitte sting
SPENNER & JUSTERE	Spenner er sikkert sydd til Walk Belt-bånd
	Hurtigkoblingsspenner kobles positivt inn når de kobles til
	Quick Connect Buckle-utløsermekanismen fungerer jevnt når den aktiveres

Rengjøring

Dette produktet bør rengjøres regelmessig for å opprettholde sikkerheten og servicevennligheten.

1. Børst av løst smuss.
2. Spray på en rengjøringsløsning. Ikke bruk løsninger som inneholder blekemiddel, fenoler, jodider eller petroleum.
3. Bruk en myk børste for å rengjøre.
4. La rengjøringsløsningen trekke inn i båndet.
5. Hånd- eller maskinvask opp til 40° Celsius.
6. Lufttørk i et godt ventilert område, vekk fra direkte sollys.

Oppbevaring

Oppbevar produktet unna direkte sollys, mye støv og fuktighet og etsende atmosfærer.