

Modell S-265 Scoop

Model S-265 Scoop Stretcher (båre) er en nødanordning for pasienthåndtering. Den er designet for å hjelpe til med å flytte en pasient når det er begrenset plass eller når pasienten trenger å bli flyttet med liten endring i kroppsposisjonen. Bruk båren i samsvar med lover og regler i landet der den brukes. Rådfør deg med de rette myndighetene for informasjon om lover og regler, og løs eventuelle spørsmål før du bruker båren sammen med en pasient. **Båren er for profesjonell bruk av minst to utdannede operatører.**

Bårerammen er konstruert i to halvdeler som kobles fra hverandre, skyv under pasienten, og trekk deretter tilbake for å løfte pasienten. Båren kan også brukes i "V" -form når den bare kobles fra bare på foten.

Andre funksjoner inkluderer en teleskopisk fotdel med låsing posisjoner for lengdejustering, tre håndtak på hver side av hovedrammen og skjulte hengsler som gjør at båren kan brettes for lagring.

Båren Model S-265 er utstyrt med et sett med tre pasientbegrensninger.



Les denne håndboken og behold for fremtidig referanse



August 2021, ver. 08

Pub. Nr. 50-8112-001_08

Lengde åpen:	1660 mm
Lengde maks:	2013 mm
Lengde brettet:	1200 mm
Bredde:	422 mm
Høyde åpen:	670 mm
Høyde brettet:	90 mm
Enhetsvekt:	9,75 kg
Vektgrense:	159 kg

Produktspesifikasjone



Produsent:

Ferno Slovakia s.r.o.

913 07 Bosaca 893 Slovakia



Tlf: +421 (0) 32 7708010, sales@ferno.sk

1. Justere bår lengde

Juster bårens lengde til pasientens høyde før du kobler ut halvdelene. Dette sikrer like justering til begge halvdelene.

FOR Å FORLENGE ELLER FORKORTE BÅREN

1. Flytt låsespaken på hver side av rammen til ulåst posisjon (Figur 1) **Merk:** Når båren ligger med forsiden opp på en flat overflate, er den låste posisjonen "ned" og den ulåste posisjonen er "opp" (Figur 1)
2. Trekk fotseksjonen utover til ønsket lengde, og stopp i nærheten av en av låsestillingene som er plassert ved hullene langs fotseksjonsrammen.
3. Sett begge låsestifter i låst posisjon (figur 1)
4. Skyv eller trekk fotseksjonen litt til den låses på plass
5. Forsikre deg om at begge sider er godt låst

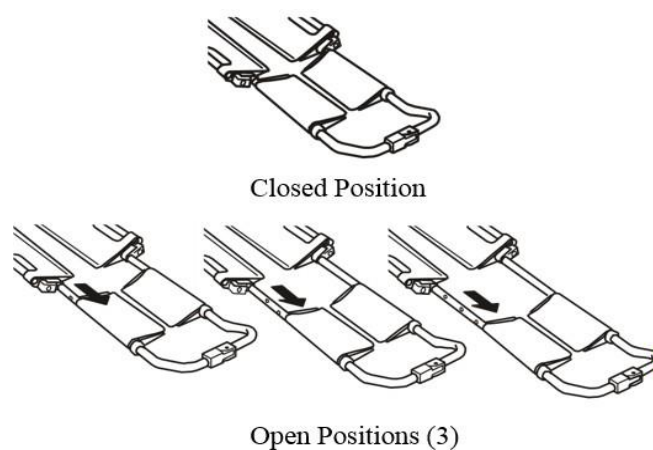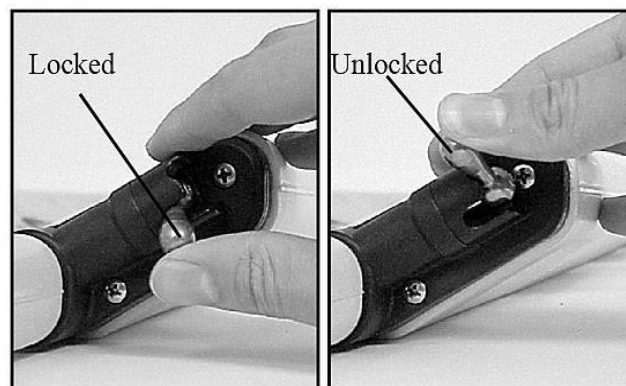

2. Deling av bære

For å skille bærehalvdelene, bruk tommelen til å trykke Twin Safety Lock-spakene på hver endekobling og trekk koblingshalvdelene fra hverandre.



Twin sikkerhetslåsspak



Bruke båren



Bruke STRETCHER „V”



Bære båren



3. BRUKER BÅRE I A "V"

Brett båren ut hvis den er brettet for lagring, og juster lengden (se B Justere bår lengden)

1. Løsne stroppene (hvis de er lagret på bære)
2. Åpne bare fotkoblingen.
3. Trekk foten og halvdelene av båren fra hverandre for å danne en "V" -form.
4. Plasser båren med pasientens hode på bunnen av „V“ (figur 6)
5. Bruk lokalt godkjente EMS-prosedyrer for å arbeide båren innover og under pasienten. Arbeid fra topp til fot til koblingshalvdelene i fotenden møtes.


For å unngå å klemme i eller trekke pasientens hud, hår eller klær, må du være forsiktig når du arbeider bære halvdelene på plass under pasienten.

4. FESTE BELTER


Model S-265 Scoop Stretcher inkluderer et sett med tre todelt belter.

Slik fester du todelt belte:

1. Spenn tilbake fastholdenheten, og del den i to stykker.
2. Før enden på det ene fastholdelsesstykket oppover gjennom en håndtaksåpning på bærerammen.
3. Hold løkken åpen og tre spennen av fastholdelse gjennom løkken
4. Trekk båndet gjennom løkken til løkken sitter tett mot bærerammen.
5. Bekreft at alle bånd er ordentlig festet

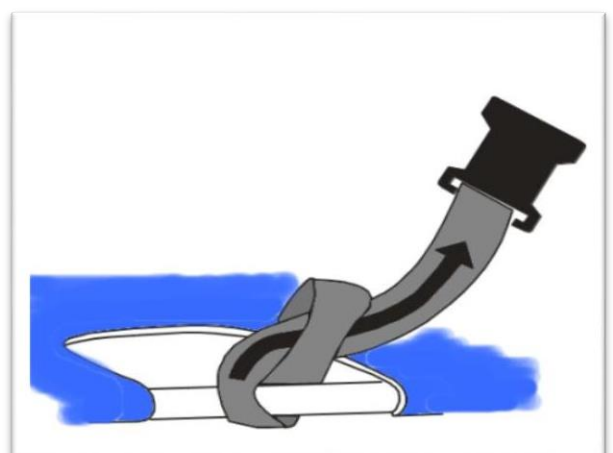

5. BRUKE EKSTRA HJELP

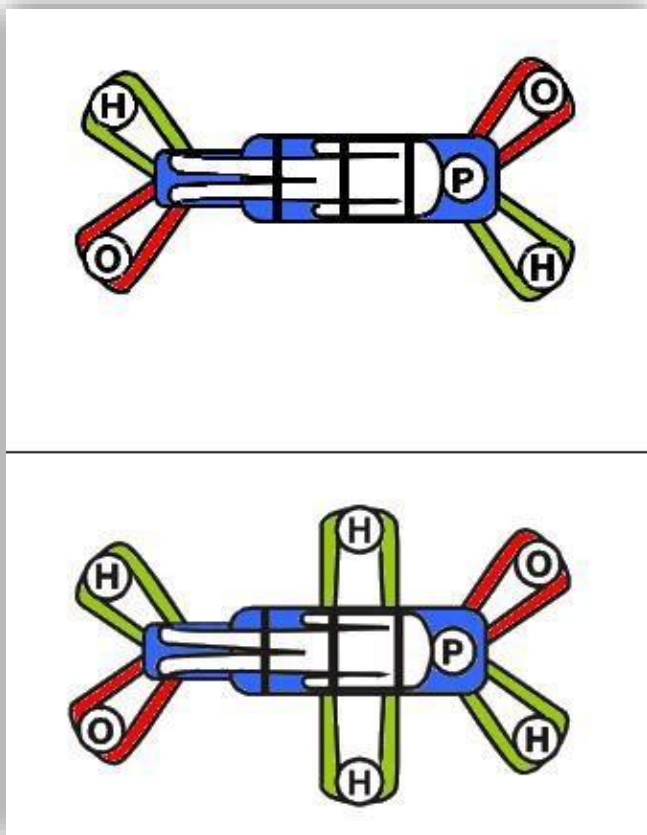



O-operatør H-hjelper P-pasient

7. BÅREKOMPONENTER

6. OPPBEVARING AV BÅREN


Brett båren hvis den er brettet for lagring, og juster lengden (se B Justere bårelengden)

1. Lås opp låsestifter på begge sider av båren.
2. Forleng fotdelen helt ved å trekke den ut til hengslene er helt synlige.
3. Løft fotseksjonen og brett den over på torsopanelet

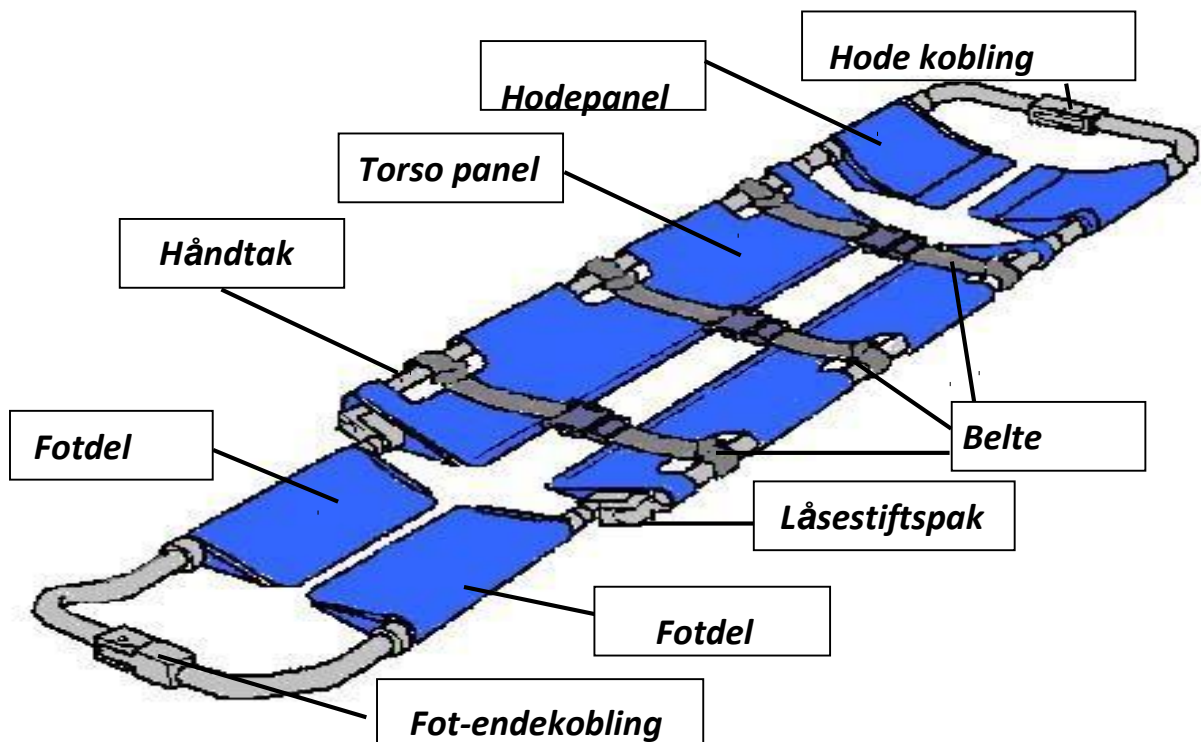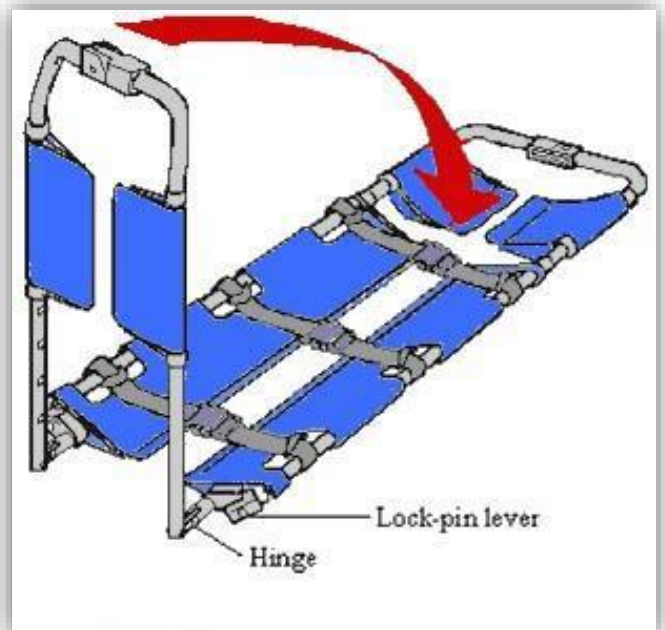

8. Smøring av båren

- hvit litiumfett
- SAE 30-vekt olje
- Teflon-smøremiddel med tørr belegg

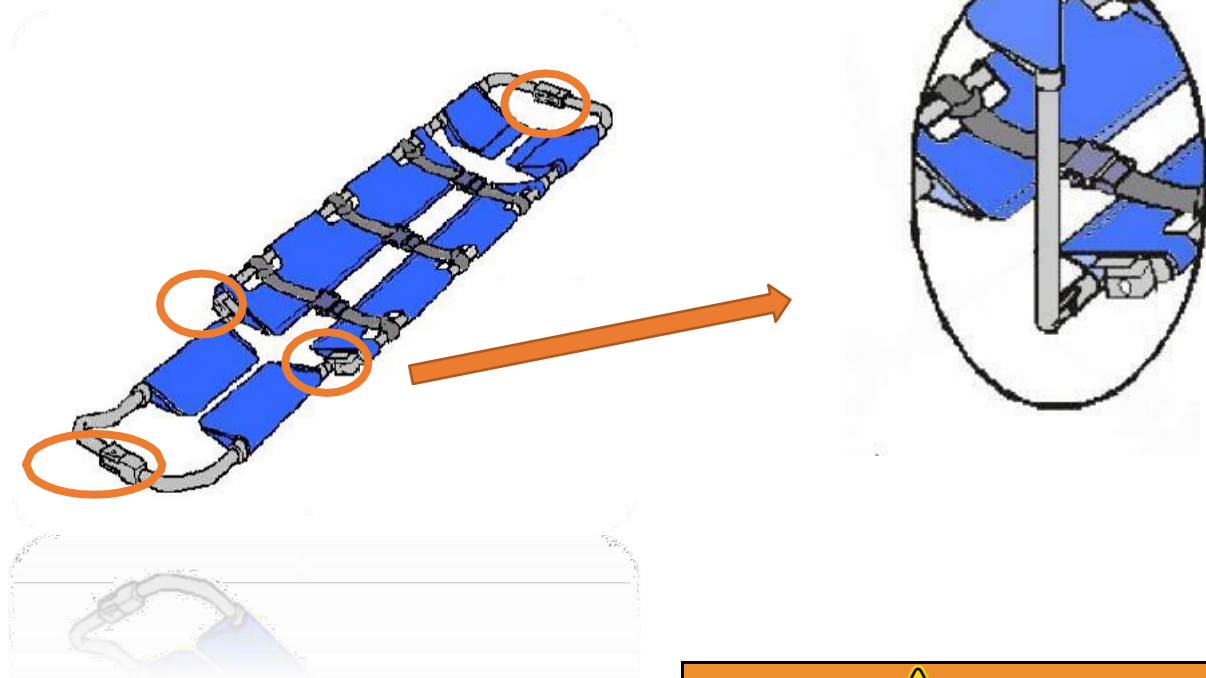

8. Garanti og service

Standard vilkår og betingelser gjelder for alt salg. En kopi er tilgjengelig på forespørsel. Disse inneholder fulle detaljer om garantibetingelser og begrenser ikke kundens lovbestemte rettigheter.

For service, vedlikehold og spørsmål angående dette eller andre produkter, vennligst kontakt din lokale distributør.

CE-merket på dette produktet viser samsvar med kravene i direktiv Vedlegg IV + Vedlegg VIII til MDR 2017/745 for medisinsk utstyr. Enheten oppfyller kravene EN 1865-1.



EC	REP
----	-----

Ferno Washington Italia Srl
via B.Zallone, n26, 40066
Pieve di Cento, Bologna, Italia
+39.051.6860028

ADVARSEL

**FOR SERVICE OG REPARASJON
VENNLIGST TA KONTAKT MED
LEVERANDØR**

**Feil bruk av båren kan forårsake
personskade.
Bruk båren kun til det formålet som er
beskrevet i denne håndboken.**

**Utrente operatører kan forårsake
personskade eller bli skadet. Tillat bare
opplært personell å betjene båren.**

**Feil bruk kan forårsake personskade. Bruk
båren bare som vist i denne håndboken.**

**En pasient uten tilsyn kan bli skadet. Hold
deg til pasienten til enhver tid.**

**En uhemmet pasient kan falle av båren
og bli skadet.
Bruk fastholdelsesanordninger for å sikre
pasienten i båren.**

**Utrente hjelpere kan forårsake skade eller
bli skadet. Betjen og vedlikehold kontrollen
av båren og rett eventuelle hjelpere.**