



Potilaan käsittely ja Ergonomia

Potilaskäsittelyn ergonomia on Ferno Nordenin ydinliiketoimintaa. Olemme yli 60 vuoden ajan valmistaneet laitteita maailmanlaajuisesti läheisessä yhteistyössä käyttäjiemme kanssa.

Ambulassipaarit:

Ambulassipaarit ovat kaiken ensihoidon keskipiste. Työkalu, joka helpottaa kaikkien ensihoitajien arkea. Turvallisuus ergonomia, hygienia ja joustavuus ovat tärkeitä.

Mukavuus, turvallisuus hoitotoiminnot kuten shokkitila, ovat tärkeitä potilaalle. Kaikkea vastasyntyneistä aina obeseihin potilaisiin on voitava käsitellä arvokkaasti ja turvallisesti. Mikä parimalli sopii yrityksellesi?

Kantotuoli/Porrastuoli:

Nykyään periaatteessa kaikissa ambulansseissa on kantotuoliporrastuoli. Kehitystä tapahtuu jatkuvasti ja kapasiteetti kasvaa. Taitettavat, laajennettavat kahvat, sivukynnärnojat, telaketjujalat, sähköiset telaketjujalat, säilytystila, paino? Kyllä, kysymyksiä on monia ja vaihtoehtoja on monia? Meillä on useita malleja, joista valita, mikä malli sopii tei

Akuuttipatjat:

Akuuttipatja (kuljetuspatja) ei ole pelkkä patja, vaan EN-1865:ssä määritelty erillinen siirtolaite. Hygieeninen, kestävä useilla nostokahvoilla, tulee kestää vähintään 150 kiloa, mukava potilaalle ja jätetty sisäpuolelta, sen tulee kestää lämpötilan vaihteluita -30- +70 astetta, lopuksi sen on läpäistävä röntgensäteilyä. Hätäpatjoissamme on myös memory foam maksimaalisen mukavuuden takaamiseksi, ja niitä käytetään päivittäin yhdessä muiden tarvikkeidemme kanssa.

Ergonomiset tarvikkeet:

Potilashallinta saattaa kuulostaa yksinkertaiselta, mutta se on jokapäiväinen, joka tulee ratkaista mahdollisimman ergonomisesti, hygieenisesti ja joustavasti. Työ ambulassipaarien kanssa tarvitsee rinnalle hyvät apuvälineet ja nykyään viemme potilaan paarien luo useammin kuin parit potilaan luo. Mitkä lisävarusteet sopivat teille?

Erikoiskuljetukset:

Inkubaattorit, lapsikuljetukset, IVA-kuljetukset, liikuntarajoitteisten kuljetukset. Kyllä, ensihoidolla on monia haasteita ratkaistavaksi. Tutustu ratkaisuihimme, kaipaako jotain?

Heavy Duty/obesit potilaat:

Ylipainoiset potilaat ovat nykyään yleisiä ensihoidossa. Meillä on täydellinen paketti, jotta voimme ratkaista tehtävän turvallisesti ja ergonomisesti. Miten te olette ratkaiseet obesin potilaan kuljetuksen?

Ergonomian koulutus:

Olemme useiden vuosien ajan tehneet tiivistä yhteistyötä Modern Arbetsteknikin kanssa. Heidän osaamisensa ja pedagogiikkansa ergonomisessa siirtymätiedossa arvostetaan kaikkialla maassa.

Nykyään heillä on kaksi koulutusta, joita voimme lämpimästi suositella:

- **Ensihoitoon mukautettu koulutus perustietoa siirtämisessä.**
- **Ensihoitoon mukautettu koulutus potilaan siirtämisessä. Raskaat liikkeet.**

Kontakt: 031-27 25 30 // office@modernarbetsteknik.se
www.modernarbetsteknik.se

Ferno VIPER POWER + Ferno VLS 320 kg

Ferno VIPER on sähköpaariratkaisu, jossa yhdistyy eurooppalainen muotoilu ja globaalit toiminnot. Helppokäyttöisyys, luotettavuus ja toimivuus yhdessä tekevät FERNO VIPERistä pohjoismaisten suosikin sähköpaareista. Jopa 320kg kantavuudella yhdessä Ferno sivukynnäröiden kanssa saat paareista, jotka selviävät isommastakin potilaista. Ferno VIPER:n toiminnot on helppo oppia, käsitellä, lastata ambulanssiin ja sieltä pois. Korkeasta kantavuudesta huolimatta, sitä on helppo ohjata ahtaissakin paikoissa. VIPER on vakaa pari, joka seisoo/ rullaa tasaisesti jopa korkeammassa asennossa.

Ferno VLS on helposti käsiteltävä ja joustava järjestelmä, jonka avulla voit lastata paarit eri kulumista ja korkeudesta alle 20 sekunnissa. VLS keskittää paarit automaattisesti ennen lastausta. VLS on yksi markkinoiden kevyimmistä järjestelmistä, mikä antaa pienimmän kokonaispainon ambulanssille.

Art.Nr F1000

Kork 38-130 cm

Leveys 60 cm

Pituus 160-200 cm

Paino 75 kg

Max kapasit. 320 kg

Sertifiointi CE, EN1789,EN1865



Ferno IN/X Ambulanssipari 318 kg

iN/X-Ambulanssiparit ovat luultavasti maailman edistyneimmät sähköparit, samalla kun niitä on helppo käsitellä. Voimaa ei tarvita eri vaiheisiin, kuten nostamiseen/laskemiseen tai ambulanssiin lastaamiseen ja purkamiseen. iN/X-Ambulanssiparit on suunniteltu ensihoidon laajan palautteen perusteella parantamaan työympäristöä ja turvallisuutta päivittäisessä ensihoidon ympäristössä ympäri maailmaa.

iN/X-Ambulanssipareissa on kaikki paareissa tarvittava tekniikka, mikä antaa sinulle mukautumismahdollisuuksia, joita mikään muu ambulanssipari ei tarjoa. Liukuportaat, vaijerikaiteet, kynnykset ja muut esteet voidaan ratkaista yksinkertaisella napinpainalluksella.

Art.Nr F8000

Kork 35,6-124,5 cm

Leveys 59,7 cm

Pituus 159,4-204,5 cm

Paino 92 kg

Max kapasit 318 kg

Sertifiointi CE, EN1789,EN1865



Ferno POWERX™ 400 kg



PowerX on paras ratkaisumme niin kutsutussa "X-Frame"-kehyksessä, joka on tehokas paarijärjestelmä, joka kantavuus on jopa 400kg! PowerX on kehitetty ajoneuvoille, joissa on nostoramppi/takalautanosti. 4 "työntötankoa" tekevät paareista erittäin helppokäyttöisen ja ergonomisen käsittelyn. PowerX on suunniteltu johdonmukaisesti hyvää hygieniaa silmällä pitäen, suorat linjat, jotka on helppo pyyhkiä puhtaaksi.

PowerX on suosikki, kun kyseessä on erikoiskuljetus, inkubaattori, IVA-potilas tai obesipotilas.

Art.Nr FGB3000

Kork 48-88 cm

Leveys 57 cm

Pituus 145-193 cm

Paino 78 kg

Max kapasit 400 kg / 350 kg

Sertifiointi CE, EN1789, EN1865

Allfa Legend 20G 300kg



ALLFA LEGEND on ambulanssipaari, joka täyttää nykyaikaisen ensihoidon vaatimukset.

Vuoristoympäristö, ahtaat hissit/portaat vanhoissa rakennuksissa, saaret rannikoilla ilmapelastus, ambulanssit ja normaalit ensihoitotehtävät. Kaikkia vastasyntyneistä ylipainoisiin aikuisiin on voitava kuljettaa turvallisesti ja mukavasti. Maaten, istuen tai muissa asennoissa. ALLFA LEGEND on paarit kaikille potilaille kaikissa ympäristöissä. Nyt myös off-roadpyörät vakiona helpottamaan ulkokäyttöä.

Allfapaarit on saatavana myös AIR-mallina, jolla on DDP-hyväksyntä, EASA-sertifiointi ilma-aluksille.

Art.Nr ALE112001

Kork 20-129 cm

Leveys 55 cm

Pituus 125-190 cm

Paino 29,2 kg (36 kg)

Max kapasit 300 kg

Sertifiointi CE, EN1789, EN1865

Ferno Mondial® Monoblock Ambulanssipaarit 280 kg

Ferno Mondial® Monobloc on ambulanssipaarit, jotka on rakennettu älykkäällä kuormateknologialla. Tekniikka, joka tekee työstäsi sujuvampaa, helpompaa ja ei vähiten ergonomisempaa parien lastaamisen ja purkamisen yhteydessä ajoneuvoon. Mondial® EZ -kuormajärjestelmä laukaisee itsenäisten jalkojen mekanismin automaattisesti kuormauksen yhteydessä. Tämä helpottaa lastaamista ja purkamista ja varmistaa, että paareilla on aina potilaan paino. Ferno Mondial® Monoblocissa on EZ-Pull-vapautusmekanismi, joka vähentää ranteisiin kohdistuvaa kuormitusta ja antaa kehon omaksua oikean asennon paareja nostettaessa tai laskettaessa.

Ferno Mondial® Monobloc on saatavana kahdessa versiossa / korkeudessa:

F2964-02 Kuormakorkeus 67-73 cm

F2970-02 Kuormakorkeus 73-79 cm

Art.Nr F2964-02/F2970-02

Kork 31-100 cm

Leveys 55 cm

Pituus 197 cm

Paino 45 kg

Max kapasit 280 kg

Lastauskork. 67-73 cm/73-79 cm

Sertifiointi CE, EN1789, EN1865



Ferno F3 Ambulanssipaarit 250 kg *TULEE PIAN!*

Ferno F3 on käytännöllinen pari, joka on suunniteltu helppokäyttöiseksi ja huollettavaksi tinkimättä turvallisuudesta tai ergonomiasta. Ferno F3:ssa on 5 eri asentoa, jotka sopivat kaikenlaisiin siirtoihin mahdollisimman ergonomisesti. Ferno F3:ssa on "Soft-load"-tekniikka, jolloin lastaus sisään ja ulos onnistuu pehmeästi, helposti ja ergonomisesti. Ferno F3 on varustettu suurilla 200 mm pyörillä, jotka helpottavat kuljetusta kaikissa ympäristöissä ja kaikilla pinnoilla. Kaikissa neljässä pyörässä on 360 asteen kääntösäde, joka helpottaa ohjaamista ahtaissa tiloissa. Ferno F3 250 kg:n kantavuus on riittävän suuri kestämään hieman painavammakin potilaat. Ferno F3:n on vain 23 kiloa painavat "nostettavat" parit tilanteisiin, joissa joudut kantamaan potilasta paareilla. Erityisen älykäs ominaisuus on kuljetusalustassa oleva sisäänrakennettu lokero, johon mahtuu spinboard. Ferno F3 on saatavana myös "monobloc" -versiona. Huomaa, että parissa on värit musta/punainen.

Art.Nr F1010

Kork Alustavasti 40-100 cm

Leveys Alustavasti 57 cm

Pituus Alustavasti 195 cm

Paino Alustavasti 51 kg (28+23 kg)

Max kapasit 250 kg

Sertifiointi CE, EN1789, EN1865





Transcend™ Traxx manuell 250kg

Upouusi Transcend™ Traxx tarjoaa käyttäjille ja potilaille turvallisen ja varman kuljetuksen portaissa. Transcend™ Traxx kestää jopa 250 kg:n potilaskuormia. Sileät ja suuret 12x3 cm kääntyvät pyörät edessä ja erittäin suuret 20x4 cm takapyörät integroiduilla iskuja vaimentavilla renkailla, joilla on helppo navigoida vaikeassa maastossa. Transcend™ Traxx vie vähän tilaa taitettuna, eikä siinä esiinny osia, jotka voisivat takertua asetettaessa ja irrotettaessa (mitat taitettuna: 91,2 x 50,7 x 20 cm). Kokoontaitetussa asennossa tuoli on lukittu niin, että sitä on helppo käsitellä ilman, että se avautuu itsestään. Sisäänvedettävät takakantokahvat ovat ainutlaatuisen kulman takaavat paremman ergonomisen asennon tuolia käsiteltäessä ja kannettaessa. Porrastuoli on manuaalinen ja liikuu helposti portaita alas, joten sinun ei tarvitse kantaa potilasta.

Art.Nr F0731402

Kork 151,8/ 90,8 cm

Leveys 50,5 cm

Syv 76/135 cm

Paino 14,7 kg

Max kapasit 250 kg

Sertifiointi CE, EN1865

Transcend™ PowerTraxx® 250kg

Upouusi Transcend™ PowerTraxx® tarjoaa käyttäjille ja potilaille maksimaalisen turvallisuuden sekä tehon portaita ylös tai alas kuljetettaessa. Transcend™ PowerTraxx elektronisesti ohjattu moottori, jossa on suora käyttövoimansiirto, ajaa telajalkoja ja pystyy käsittelemään jopa 250 kg:n potilaskuormia helposti portaita ylös ja alas. Akun kapasiteetti on äärimmäinen ja se kestää 24 tunnin työvuorot ilman ongelmia (keskimäärin 40 portaat ylös ja alas). Sileät ja suuret 12x3 cm kääntyvät pyörät edessä ja erittäin suuret 20x4 cm takapyörät integroiduilla iskuja vaimentavilla renkailla, joilla on helppo liikkua vaikeassa maastossa. Transcend™ PowerTraxx® vie vähän tilaa taitettuna, eikä siinä esiinny osia, jotka voisivat takertua asettamisen ja poistamisen aikana (mitat taitettuna: 91,2 x 50,7 x 20 cm). Kokoontaitetussa asennossa tuoli on lukittu niin, että sitä on helppo käsitellä ilman, että se avautuu itsestään.

Art.Nr F0731403

Kork 151,8/ 90,8 cm

Leveys 50,5 cm

Syv 76 /135 cm

Paino 23,3 kg

Max kapasit 250 kg

Sertifiointi CE, EN1865



FAST-tuoli manuell 250 kg

FAST on joustavin tuolisarja yksinkertaiseen ja ergonomiseen potilaan käsittelyyn. FAST on vahva rakenne ja sitä voidaan kuormata jopa 250 kg. Tämä tuoli, jossa on manuaaliset ryömintäjalat, liukuu alas portaita ja välttää raskaan noston. Tuoli on varustettu suurilla pyörivillä pyörillä edessä ja kiinteillä takapyörillä, mikä helpottaa ohjaamista kaikissa ympäristöissä. Parhaan ergonomian saavuttamiseksi FAST voidaan mukauttaa eri käyttäjien pituuden mukaan. Hygieeninen vinyyli-istuim on korotettu selkänöja, mikä tekee siitä mukavan istua. Manuaalinen tuoli on saatavana kahdessa mallissa: F05610 Kiinteät telajalat
F05620 Irrotettavat telajalat. Irrotettavat telajalat voivat olla sopivia, jos joudut joskus kantamaan tuolia portaita ylös ja haluat keventää painoa. Törmäystestattu seinäkiinnike on saatavana lisävarusteena, jolla istuin voidaan kiinnittää turvallisesti ajoneuvoon. (tuotenro F05690)

Art.Nr F05610/F05620

Kork 100-158 cm


Leveys 54,5 cm

Pituus 69,5 cm

Paino 15 kg/ 11,2 kg

Max kapasit 250 kg

Sertifiointi CE, EN1865

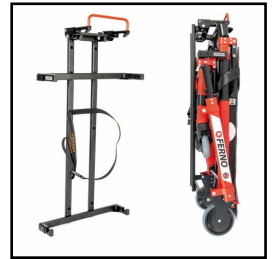

FAST-tuoli PowerTraxx 227 kg

FAST-järjestelmä on uusi ja joustava tuoliratkaisu, istuin ja sähkötuoli yhdellä moottorilla. Moottoroiduilla telajaloilla (PowerTraxx) voit helposti kuljettaa potilaita ylös ja alas portaita pitkin.

Jos joudut tilanteisiin, joissa potilasta on kannettava, voit nopeasti ja helposti irrottaa telajalat moottorilla ja sinulla on kevyempi kantotuoli käytössä. Tästä voi olla hyötyä myös lastattaessa ja purettaessa ajoneuvoa. FAST-tuolissa on vahva rakenne ja sitä voidaan kuormittaa jopa 227 kg:lla. Tuolia on helppo ohjata kaikissa ympäristöissä. Parhaan ergonomian saavuttamiseksi FAST voidaan mukauttaa eri käyttäjien pituuden mukaan. Hygieeninen vinyyli-istuimessa on korotettu selkänöja, mikä tekee siitä mukavan istua. Törmäystestattu seinäkiinnike on saatavana lisävarusteena, jolla istuin voidaan kiinnittää turvallisesti ajoneuvoon. (tuotenro F05690)

Art.Nr F05630

Kork 100-158 cm


Leveys 54,5 cm

Pituus 69,5 cm

Paino 25 kg

Max kapasit 227 kg

Sertifiointi CE, EN1865

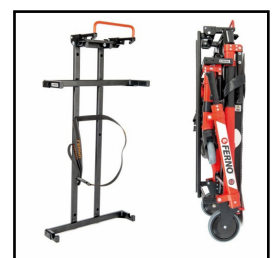

Compact 2 Track 200kg



Fernos Compact 2 Track yhdistää molempien maailmojen parhaat puolet. Compact 2 Track on erittäin suosittu tuolimme kehitystyön viimeisin tuote. Vähentääksesi kuorman minimiin, kiinnitä telajalat pikalukolla, niin sinulla on rapputuoli, joka liukuu helposti alas portaita. Suuri etu, jonka saat, on, että valitset tilanteesi perusteella, haluatko kantotuolin vai porrastuolin. Kahva parantaa ergonomiaa ja saat jonkin verran etäisyyttä potilaan päähän. Kahvassa on mukava tyyny potilaalle, joka estää päätä kaatumasta taaksepäin. Tässä on täydellinen tuoli, joka on joustava ja luotettava kaikissa tilanteissa.

Art.Nr FGB071481450

Kork 106-139 cm

Leveys 45 cm

Pituus 60 cm

Paino 15 kg

Max kapasit 200 kg

Sertifiointi CE, EN1865

Ferno S242 kantotuoli 159 kg



S242 on erittäin käytännöllinen, yksinkertainen ja suosittu kantotuoli. Teleskooppi kahvat jalan päässä ja kaksoiskahvat takana tarjoavat useita vaihtoehtoja hankalaan nostoon. Tämä on yksinkertaisempi malli ilman telajalkoja sinulle, joka haluat vain käytännöllisen tuolin ja työkalun liikkumiseen.

Art.Nr S242

Kork 91,5 cm

Leveys 52 cm

Pituus 121cm

Paino 10 kg

Max kapasit 159 kg

Sertifiointi CE, EN1865

Akuuttipatja UNI Standard 250kg

UNI Emergency Mattress on turvallinen, hygieeninen ja ergonominen yleispatja, joka sopii useimpiin ambulanssipaireihin markkinoilla. UNI Emergency Mattress on testattu ja kehitetty yhdessä pohjoismaisen ensihoitohenkilöstön kanssa, jolla on korkeat hygienia-, turvallisuus-, ergonomia- ja mukavuusvaatimukset. Häätäpatjoilla on korkeammat vaatimukset kuin "tavallisilla" patjoilla toiminnan ja hygienian suhteen. Tyyny voidaan kääntää pois, jos haluat paremman kulman intuboinnin aikana.

Suuret kädensijat, joilla patjaa on helppo siirtää. Parempi käyttömukavuus, patjassa on 15 mm memory foamia ja 45 mm comfort foamia Häätäpatjan sisäpuolella on piilotettu V-muotoilu, joka tarjoaa lisätukea ja mukavuutta potilaalle Testattu ja kehitetty toimimaan Step by Step -portaiden kanssa. V-muotoinen jalkopää sopii kaikkiin parimalleihin.

Art.Nr	GE24271030000
Kork	6 cm
Leveys	50 cm
Pituus	185 cm
Paino	4,7 kg
Max kapasit	250 kg
Sertifiointi	CE, EN1865, MDR2017/745



Akuuttipatja UNI Komfort 250kg

UNI Emergency patjan mukavuudessa takaa lisävahto . UNI Emergency Mattress on turvallinen, hygieeninen ja ergonominen yleispatja, joka sopii useimpiin ambulanssipaireihin markkinoilla. UNI Emergency Mattress on testattu ja kehitetty yhdessä pohjoismaisen ensihoitohenkilöstön kanssa, jolla on korkeat hygienia-, turvallisuus-, ergonomia- ja mukavuusvaatimukset. Häätäpatjoilla on korkeammat vaatimukset kuin "tavallisilla" patjoilla toiminnan ja hygienian suhteen. Tyyny voidaan kääntää pois, jos haluat paremman kulman intuboinnin aikana.

Suuret kädensijat, joilla patjaa on helppo siirtää. Parempi käyttömukavuus, 25 mm sensus memory foam ja 65 mm comfort foam Häätäpatjan sisäpuolella on piilotettu V-muotoilu, joka tarjoaa lisätukea ja mukavuutta potilaalle. Testattu ja kehitetty ajatellen myös käyttöä portaissa.

V-muotoinen jalkopää sopii kaikkiin parimalleihin.

Art.Nr	GE24271030003
Kork	10 cm
Leveys	50 cm
pituus	185 cm
Paino	5,2 kg
Max kapasit	250 kg
Sertifiointi	CE, EN1865, MDR2017/745



Easy Glide Liukulauta 60 cm



EasyGlide on nerokas pieni keksintö. Se auttaa siirtymisessä pyörätuolista sänkyyn, wc:hen, kantotuoliin ja moniin muihin paikkoihin, joissa saatat haluta istua hetken. Se sopii erityisen hyvin korkeuserojen tasoittamiseen tai lyhyempien matkojen silloittamiseen. Liukulaudan reunat voidaan taivuttaa, joten ne on helppo sijoittaa pyörätuolin pyörien eteen suojaksi lialta ja muulta. Sileä yläosa helpottaa liikuttamista, kun taas liukueste teippi pohjassa auttaa, että se ei luisu pois alta liikuttaessa.

Art.Nr SWR131641

Kork 0,6 cm

Leveys 33 cm

Pituus 60 cm

Paino 1 kg

Max kapasit 136 kg

Sertifiointi CE

Liukulauta 114 cm Ferno



Liukulauta on fantastinen keksintö, joka helpottaa suuresti potilaan käsittelyssä ja siirrossa eri yksiköiden, kuten pyörätuolien, sängyn ja paarien välillä. Sileä materiaali helpottaa potilaan liikkumista ja sopii myös korkeuserojen tasoittamiseen tai lyhyempien etäisyyksien silloittamiseen. Fernon liukulauta on suurempi kuin muut liukulaudat ja sopii erityisen hyvin, kun tarvitset liukulautaa pituudeltaan tai kun joudut siirtämään hieman isompia potilaita. Makaavaa potilasta siirrettäessä on erittäin kätevää käyttää kahta liukuvaa lautaa. Yksi lantion alla ja yksi olkapään alla. Kuuden eri kahvan ansiosta saat helposti otteen liukulaudalta. Tämä on suosikki, kun työskentelet obesien potilaiden kanssa.

Art.Nr F673

Kork 0,6 cm

Leveys 46 cm

Pituus 114 cm

Paino 2 kg

Sertifiointi CE

Evakuointihihnat

Step by Step -hihnasarja on ainutlaatuinen ergonominen apuväline, joka yhdessä akuutti- ja tyhjiöpatjoidemme kanssa antaa sinulle turvallisen, ja ergonomisen tavan siirtää potilaita. Vie vähän tilaa ja on kevyt. Voidaan käyttää kaikissa hätäpatjoissamme ja tyhjiöpatjoissamme. Pussi jaloille estää potilasta liukumasta. Kuormitustestatut hihnat 250 kg asti. Selkeä ja helposti ymmärrettävä käyttöohje. Vahvistetut hihnat säädettävillä kahvoilla pään ja jalkojen päihin sekä neljä potilasvyötä kiinnitystä varten. Tämä on UUSI parannettu versio, joka tarjoaa enemmän joustavuutta sekä henkilökunnalle että potilaille. Nyt voit muun muassa säädettävän pää- ja jalkahihnan toimimaan paremmin eri pituuksien mukaan. Sisältää myös neljä potilasvyötä käyttäjien toiveiden mukaan.

Art.Nr GE1500000117

Kork 15 cm

Leveys 20 cm

pituus 30 cm

Paino 1,3 kg

Max kapasit 250 kg

Sertifiointi CE



Evakuointimatto Minitranz 250 kg

MINITRANZ on erinomainen apu potilaiden liikuttamiseen, erityisesti ahtaissa tiloissa, joihin on vaikea päästä.

Se sopii akuuttipatjan alle tai päälle ja on hyvä ergonominen työkalu eri tilanteisiin.

Nyt alapuoli on vahvistettu "liukupinnalla" kuten akuuttipatjoissakin. Hyvä apuväline siellä, missä potilaiden luo pääsy ja siirtäminen on vaikeaa. Musta mallimme on levennetty parantamaan ergonomiaa ja joustavuutta sekä sopimaan siirtoihin pelastuspaareille ja sieltä pois.

Art.Nr GE70050

Kork 1,5 cm


Leveys 76 cm

Pituus 136 cm

paino 1,8 kg

Max kapasit 250 kg

Sertifiointi CE

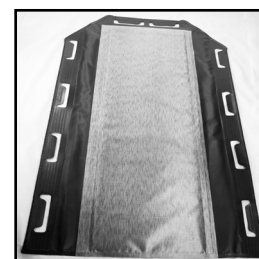

VALJAAT

Easylift Shoulder on apuväline, joka on kehitetty helpottamaan käsiä ja käsivarsia paria kantaessa. Easylift siirtää rasituksen käsivarsilta koko ylävartalolle. Se on helppokäyttöinen ja siinä on ainutlaatuiset toiminnot, jotka tekevät tästä tulevaisuuden hihnan. Easyliftissä on kitkalukko, joka antaa osittain tukevan otteen ja samalla voit irroittaa otteen, jos tapahtuu odottamaton tilanne. Monet käyttävät ambulanssissa henkilökohtaisina valjaina, jotka ovat aina valmiita työtakin alla, jos on tiedossa raskas nosto!

Art.Nr GE15000000016

Paino0,4 kg



Ferno Easy Handle 250 kg

Ferno Easy Handle, yksinkertainen ratkaisu, joka tEasy Handle on ergonominen apuväline, joka tuntuu käytössä ja on tarkoitettu käytettäväksi nostettaessa patjoja, minipaareja, tyhjiöpatjoja, kauhapaareja jne. Kun sinun täytyy päästä hieman paremmin käsiksi ja saada ergonomisempi ote. Easy Handle mahdollistaa ergonomisemman noston polven korkeudelta.



Ferno Easy -kahvasarjassa on 4 nostohihnaa ergonomisilla kahvoilla ja se on käytännöllisessä laukussa. Kaikki pakattu käytännölliseen pussiin

Art.Nr GE15000000034

Pituus 40 cm

Paino0,45 kg

Max kapasit 250 kg

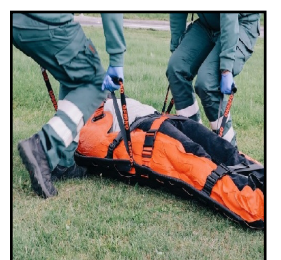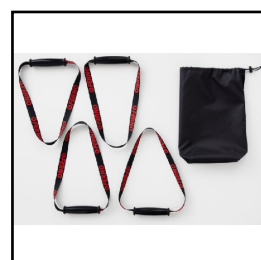

Retmex® Rescue Standard 250kg

Retmex® Rescue Stretcher Standard 250kg on käytännöllinen pelastuspaari, joka mahtuu pieneen tilaan.

Jotta selviät kriittisistäkin tilanteista, pelastuspaari on suunniteltu ensiluokkaisesta, laadukkaasta materiaalista, joka kestää kovaa rasitusta ja on samalla helppo pitää puhtaana. Erittäin kompaktin säilytystilan ja 900 g:n painon ansiosta Retmex® Rescue Stretcher Standard 250kg on kevyt ja joustava laadusta ja turvallisuudesta tinkimättä! Se voi aina olla mukana kentällä, ajoneuvossa tai terveydenhuoltopakkauksessa. Voidaan pestä 60 asteessa. EN-ISO 13485: 2016, EN-ISO 14971: 2019 Täydellinen tilanteisiin, kuten PDV EVACUATION-LIFT.

Art.Nr 5006063


Leveys 80 cm

Pituus 205 cm

paino 0,9 kg

Max kapasit 250 kg

Sertifiointi CE

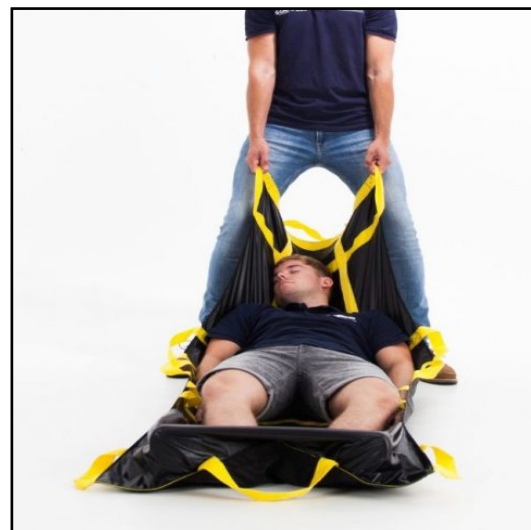

Retmex® Rescue Bariatric 385 kg

Retmex® Rescue Stretcher Bariatric 385kg on käytännöllinen pelastuspaari, joka mahtuu pieneen tilaan. Tämä on erinomainen pelastuspaari, joka selviää kaikissa tilanteissa. Täydellinen ambulanssiin ja pelastusajoneuvoihin. Nestettä hylkivä pinta ja mukavat kahvat kaikki pakattuna joustavaan pussiin. Jotta selviät kriittisistäkin tilanteista, pelastuspaarit on suunniteltu ensiluokkaisesta, laadukkaasta materiaalista, joka kestää kovaa rasitusta ja on samalla helppo pitää puhtaana. Erittäin kompaktin säilytystilan ja 3 kg:n painon ansiosta Retmex® Rescue Stretcher Bariatric 385kg on kevyt ja joustava laadusta ja turvallisuudesta tinkimättä! Voidaan pestä 60 asteessa. EN-ISO 13485: 2016, EN-ISO 14971: 2019 Täydellinen tilanteisiin, kuten PDV EVACUATION-LIFT.

Art.Nr 5006062


Leveys 120 cm

Pituus 220 cm

Paino 3 kg

Max kapasit 385 kg

Sertifiointi CE

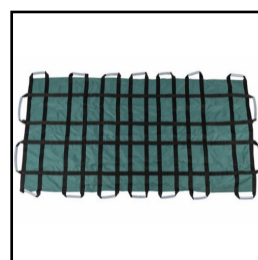

Tukivyö siirtoon Ferno Walkbelt

Ferno Walk Belt on ergonominen tukivyö, joka kiinnitetään potilaaseen ja antaa henkilökunnalle mahdollisuuden tukea avustettavaa noustessa, kävellessä tai liikkuesssa. Mukana tulevat reisivyöt, jotka voidaan laittaa jalkojen ympärille, joten tukivyö ei liu'u ylös käytön aikana. Neljä vaaka- ja neljä pystysuoraa kahvaa tarjoavat useita mahdollisuuksia saada hyvä ote ja hoitovyö voidaan pestä pesukoneessa.



Art.Nr FWEWBLS

Leveys 15 cm

Pituus 140 cm

Paino 0,3 kg

Arctic SAANA Multimover, 260 kg

Joustava ja hyvin harkittu evakuointialusta nopeaan evakuointiin ja liikuttamiseen eri ympäristöissä, myös ahtaissa tiloissa. 12 kahvaa takaavat hyvät nostomahdollisuudet. Testattu 260 kg:n nostokyvyille. Mukana Arctic SAANA Poncho optimaalisen lämmön säilyttämiseksi ja jäähtymisen estämiseksi. Näppärän pakkauskoon ansiosta se on ottaa mukaan myös maastoon. Pakkauksen koko: 36 cm x 23 cm x 4 cm. Täydellinen tilanteisiin, kuten PDV-EVACUATION-LIFT.



Art.Nr 5006007

Kork 2 cm

Leveys 70 cm (poncho 82 cm)

Pituus 200 cm

Paino 1,1 kg


Max kapasit 260 kg

Sertifiointi CE, NSN: 7210-58-001-3419



Siirtolakana, kertakäyttöinen 415 kg

Flexislide on hygieeninen, potilaan alla kertakäyttöinen siirtoapu, joka on ihanteellinen kaikkeen potilaan sivuttaiseen siirtoon. Flexislide helpottaa työtä ja vähentää terveydenhuollon ammattilaisten selän ja hartioiden rasitusvammojen riskiä. Kestää 415 kg:n painon sekä kuivana että märkänä. Testattu syttyvyys EN ISO12952-1: 2010 mukaisesti ja nauha BS EN 13795: 2011 + A1: 2013 mukaan Saatavana kahdessa koossa, vakio (5006201) ja leveä (5006202) Erittäin hyvä lisävaruste mm tyhjiöpatjamme kanssa.

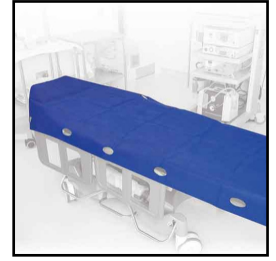

Art.Nr	5006201/ 5006202
Kork	2 cm
leveys	85/ 115 cm
Pituus	195 cm
Paino	450 g
Max kapasit	415 kg
Sertifiointi	CE

Kertakäyttöinen liinavaatesetti ambulanssiin 250 kg

Arctic Easy Kit Ambulance on Pohjoismaiseen ympäristöön suunniteltu kätevä kertakäyttösetti ambulanssipaareille. Kertakäyttöisen lakanan lisäksi setti sisältää myös tynyn ja pehmeän fleecipeiton. Kestävyys vähentää kontaminaatoriskiä ja lisää siten potilasturvallisuutta. Arctic Easy Kit sopii erittäin hyvin yksiköille ja käyttäjille, joiden on potilaskontaktit ovat lyhyitä ja joilla potilas vaihtuu usein. Kertakäyttöinen, lateksiton, kierrätettävä ja kustannustehokas.



Art.Nr	5006000
Pakkauskoko	35x24x7cm
Paino	0,6 kg
Max kapasit	220 kg
Sertifiointi	CE

TYNYNYLIINA, kertakäyttöinen

Suojatyynyliinat ovat hygieeninen, mutta silti mukava vaihtoehto tyynyn päällä oleville tyynyliinoille potilaiden hoidossa. Hyvä suoja mm MRP-tyynylle ja tavallisille paarintyynyille.

- Ei sisällä lateksia tai ftalaatteja
- Hajuton
- Koostuu jossain määrin uusiutuvasta materiaalista
- Täyttää standardin SS-EN13795 mukaiset vaatimukset
- Testattu ja hyväksytty syttyvyyden suhteen standardin SS-EN ISO12952- mukaisesti

Art.Nr 5006203

Leveys 50 cm

Pituus 60 cm

Sertifiointi CE



Lämpöpeitto, kertakäyttöinen

Kertakäyttöinen tuote, jolla on korkea lämmöneristyskyky passiiviseen lämmön säilyttämiseen. Kevyt materiaali ja vie huomattavasti vähemmän tilaa taitettuna kuin tavalliset peitot/peitot. Peiton koko on 150 cm leveä ja 190 cm pitkä.

Peitä koko vartalo, myös pää maksimaalisen lämpövaikutuksen saavuttamiseksi.

Huomattavasti parempi eristys kuin perinteisellä ristikkohuovalla (TOG-arvot 1,3 ja 0,9). Lämpötestattu standardin SS-ISO 5085.1: 2004 mukaisesti hoitovuoteille. Valmistettu polypropeenista ja polyesteristä. Ei sisällä lateksia tai PVC:tä, hajuton. Täyttää standardin SS-EN 13795 mukaiset kuidun irtoamisvaatimukset.

Testattu ja hyväksytty syttyvyyssstandardin SS-EN ISO 12952-1 mukaisesti.

Art.Nr 5006204

Leveys 150 cm

Pituus 190 cm

Sertifiointi CE



KangooFix 1,8-5 kg

KangooFix on täysin ainutlaatuinen ja vasta kehitetty, patentoitu vyöjärjestelmä vastasyntyneiden turvallisiin ambulanssikuljetuksiin. KangooFix on kehitetty suojaamaan lasta, vanhempaa ja henkilökuntaa. Kaikki tulee voida kiinnittää turvallisesti ambulanssissa kuljetuksen ajaksi. KangooFix on testattu sekä lääketieteellisillä kenttätesteillä, sekä dynaamisilla törmäystesteillä (10 & 20G). Käytetään usein hyvänä lisänä vastasyntyneiden terveydenhuollossa, mikäli lapsen kuljetus tapahtuu esim. sairaaloiden välillä. 1,5-5 kg painaville lapsille.

Art.Nr GE15271000820

Kork 5 cm

Leveys 23 cm

Pituus 33 cm

Paino 1 kg

Max kapasit 5 kg

Sertifiointi CE, EN1789



PediMate Plus 4,5-45 kg

PediMate®Plus UUTUUS!

PediMate®Plus tarjoaa turvallisen kuljetuksen ambulanssissa pienimmille lapsille ja on suunniteltu 4,5-45 kg painaville lapsipotilaille. Helposti käsiteltävä turvavyö.

PediMate Plus:n käyttöönotto on nopeaa ja helppoa. Kiinnitetään ambulanssipaireihin kolmella hihnalla. Säädettävän viisipistevyön ansiosta PediMate on helppo mukauttaa lapsen koon mukaan.

Art.Nr 5003055

Leveys 48 cm

Pituus 90 cm

Paino 1,59 kg

Max kapasit 45 kg

Sertifiointi CE



UNI-ClipDoc System™ Incubator Interface LifePort/AeroSled

UNI-ClipDoc System™ kehitettiin varmistamaan sujuvat potilassiirrot maa- ja lentoliikenteen välillä. Tämä ainutlaatuisesti suunniteltu käyttöliittymä mahdollistaa potilaan kantoalustojen, kuten LifePortin, AeroSledin ja inkubaattorien siirtämisen suoraan lentokoneesta ambulanssiin.

UNI-ClipDoc System peilaa lentokoneen/helikopterin lattiaa ja tarjoaa sujuvan ja turvallisen prosessin potilaan käsittelyyn. Potilaita hoitava henkilöstö ymmärtää, kuinka tärkeää on tehdä jokaisesta siirrosta mahdollisimman helppoa ja stressitöntä.

FERNON UNI-ClipDoc System on ratkaisu maasta ilmaan.

2-osaisen rakenteen nopea ja helppo asennus. Kevyesti pakattu kantolaukuihin. Testattu ja hyväksytty standardin EN 1789 mukaisesti.

Art.Nr FGB031379000

Kork 20,5 cm


Leveys 58,5 cm

Pituus 195,5 cm

Paino 32,3 kg

Max kapasit Käyttö tavallisemmissa parimalleissa

Sertifiointi CE, EN1789

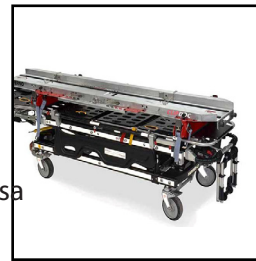

ITC Incubator Transport Interface

ITC (Incubator Transport Interface) -liitäntä on suunniteltu erityisesti inkubaattorien turvalliseen kuljetukseen useilla Fernon erilaisilla ambulanssipaareilla. ITC-järjestelmä koostuu rungosta ja kuudesta pikaliittimestä ja 4 sisäänvedettävästä kahvasta.

ITC-liitäntässä on 2 poikittaista palkkia ja 4 kiinnityspistettä inkubaattorille. Kun inkubaattori on ankkuroitu ITC-runkoon inkubaattorin valmistajan ohjeiden mukaisesti, se nostetaan paikoilleen ja kiinnitetään ambulanssipaarien 6 pikaliittimeen turvallisen kuljetuksen takaamiseksi.

Testattu ja hyväksytty standardin EN 1789 mukaisesti.

Art.Nr F7000-ITCHLINX

Kork 13,5 cm


Leveys 62 cm

Pituus 120 cm

paino 10 kg

Max kapasit 140 kg

Sertifiointi CE, EN1789

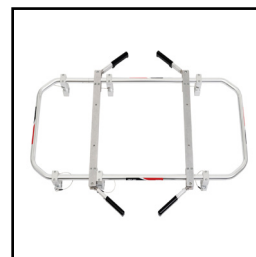

PacRac™+ Intraxx IVA-plattform 25 kg

Pac Rac + IVA -alusta lisävarusteille kuljetuksen aikana yhteensä 25 kg asti. Pac Rac + IVA Platformissa on Intraxx-profiilit, jotka mahdollistavat helpon ja turvallisen nopean liittämisen Intraxx-kannattimeen, kaksi integroitua tippatankoa jatarvittaessa pois tieltä kääntyvät sivut, jotta potilaat voidaan siirtää sängystä parille poistamatta Pac Rac + -laitetta parista.

Pac Rac + IVA Platform on helposti taitettava litteäksi ambulanssissa säilytystä varten. Pac Rac + on kiinnitetty parien jalkapäähän useimmissa Ferno-paareissa. PacRac + on valmistettu jauhemaalattua alumiinista ja on yksinkertainen, kestävä ja helppo puhdistaa. Taitettuna 12x53x56 cm

Art.Nr F8034

Kork 56 cm

Levys 53 cm

Syv 42 cm

paino 7,2 kg

Max kapasit 25 kg

Sertifiointi CE, EN 1789



Easytrans Heavy Duty 20 kg

Easy Trans IVA -alusta on suunniteltu kiinnittämään hoitolaitteet ambulanssipaareille. Alustalle asennettu ulkoinen varuste voi painaa max. 20 kg.

Taso on kiinnitetty ambulanssipaarien jalkapäähän.

Easytrans on mukautettavissa Alfa-paareille, Ferno Mondialille ja Strykerille.

Art.Nr 5009313

Kork 83 cm


Leveys 61 cm

Pituus 64 cm

paino 9,7 kg

Max kapasit 20 kg

Sertifiointi CE, EN1789

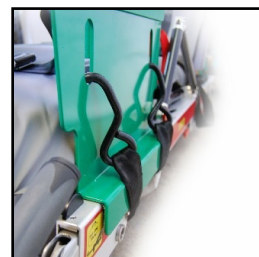

Tyhjiötyyny MRP, Motion Restriction Pillow

MRP on kehitetty yhdessä ensihoitopalvelun kanssa tarjoamaan mukava, käytännöllinen ja hygieeninen tyyny, jota voidaan käyttää liikkeen rajoittamiseen ambulanssipaareilla kuljetettaessa. Parempi pään ja kaulan vakaus on toivottavaa monissa kuljetustilanteissa, kuten trauma, aivohalvaus, tajunnan menetys ja intuboidut potilaat. Muotoile tyyny haluamallasi tavalla ja poista ilma helposti MRP:stä erikseen hankittavalla tyhjiöpumpullamme (GEAS160). MRP-tyynyä voi käyttää paareilla myös kuten tavallisesta tyynyä, ilman tyhjiötä.

- Potilaalle mukava
- Helppokäyttöinen
- Helppo puhdistaa
- Yksilöllinen

Art.Nr GE1500000114

Kork 8 cm

Leveys 34 cm

Pituus 47 cm

Paino 700 g

Sertifiointi CE



Tyyny ambulanssipaareille, harmaa

Äskettäin kehitetty tyynymme ambulanssipaareille on erittäin mukava, koska se on täytetty vaahtomuovin, tyynykuitujen ja rakeiden seoksella. Tyyny on kiinnitetty paariin kahdella hihnalla ja se on helppo puhdistaa potilaiden välissä.

Huomaa, että toiminto on sama kuin tavallisella tyynyllä, se ei ole tyhjiötuote.

Tyyny kuuluu Alfa Legendin vakiovarusteisiin.

Tyyny lisää mukavuutta ja hygieniaa!

Art.Nr AL131319

Kork 10 cm

Leveys 48 cm

Pituus 36 cm

Vikt 0,7 kg



Ferno Scoop® EXL 227 kg

SCOOP® EXL on epäilemättä suosituin tuottemme potilaan siirtämiseen, mutta myös tilanteisiin, joissa joudut käyttämään kauhapaareja. Vielä tärkeämpää nykyään, kun potilasta on siirrettävä paareille ja tyhjiöpatjalle. Ainutlaatuinen TSL-lukko ja ergonomiset kahvat tekevät Scoop® EXL:stä ylivoimaisen. Scoop® EXL:ää voidaan käyttää röntgen-, CT- ja magneettikuvauksissa. Kauhapaareja täydennetään lisävarusteilla, kuten X-vyöt ja niskatuki. Kauhapaarit voidaan leventää Extender kit TSL:llä, silti samalla kantavuudella. Voidaan käyttää myös sydämenpysähdyksessä nopeaa potilaan hoitoa varten ja yhdessä Lucasin kanssa. Extender kit TSL (F0832274)

Art.Nr F065EXL

Kork 8 cm


Leveys 43 cm

Pituus 165-201 cm

Paino 8 kg

Max kapasit 227 kg

Sertifiointi CE, EN1865

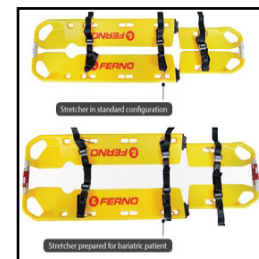

TYHJIÖPATJA Easy Fix Plus II 250 kg

EasyFix PLUS II:ssa on ainutlaatuinen muotoilu, joka tukee päätä, niskaa ja selkää paremmin ilman, että potilaalla käytetään kovakauluria. Ainutlaatuinen muotoilu helpottaa myös liikuntarajoitteisen potilaan hengitysteiden hallintaa. EasyFix PLUS:n yläosassa on vahvistettu pohjalevy, joka auttaa pään ja niskarangan tukemisessa. Ainutlaatuinen muotoilu yhdessä potilasvöiden kanssa antaa paremman tuen kuin perinteiset järjestelmät. Tämän järjestelmän kehitys perustuu X-vöiden toimintoihin, joissa on osoitettu, että ristikiinnitys tarjoaa selkeitä etuja. Nykyään tyhjiöpatja on yleinen ergonominen apuväline tuettaville potilaille. Yhdessä Step by Stepin kanssa jopa 250 kg painavat potilaat voidaan siirtää mukavasti portaissa ja tasaisella alustalla ambulanssiin.

Art.Nr GE23271511001

Kork 4,5 cm

Leveys 130/72 cm

Pituus 208 cm

Paino 8,7/10,5 kg

Max kapasit 250 kg

Sertifiointi CE, EN1865



EVAKOINTIMATTO Heavy duty 380 kg

Fernon evakuointipatja Heavy Duty on suunniteltu tukemaan raskaiden potilaiden käsittelyä ja siirtämään heitä turvallisemmin ja ergonomisesti. Jotta patjaa voisi käyttää tarvittaessa nopeasti, se on suunniteltu kokonaisvaltaiseksi ratkaisuksi, jossa patjaan on kiinnitetty vetohihnat ja vyöt.

Liukupinnoitettu selkäpuoli mahdollistaa liikkumisen vetämällä potilasta maassa ja alas portaita ilman nostamista. Patjassa on kuusi kahvaa kummallakin sivulla, jotta useat pelastajat voivat turvallisesti auttaa ja tehdä hallitun noston.

Art.Nr FGB031379000

Kork 45,5-99 cm

Leveys 7 cm

Pituus 195,5 cm

Paino 22 kg

Max kapasit 180 kg

Sertifiointi CE



Evakuointialusta Heavy Duty 380 kg

Heavy Duty -evakuointialkana on tehokas apuväline, joka on kehitetty käytettäväksi raskaampien potilaiden siirtämiseen.

Täyshitattu materiaali ja sen ympärillä oleva 20 kahvaa mahdollistavat joustavuuden, kun ihmisiä on siirrettävä erilaisissa ympäristöissä. Tämä luo edellytykset käyttäjille paremmalle ergonomiselle työskentelytavalle.

Selkäosa koostuu liukupinnasta, joka vähentää kitkaa, kun joudut vetämään pelastettavaa esimerkiksi lattialla.

Art.Nr GE23005000005

Kork 1 cm

Leveys 143 cm

Pituus 205 cm

Paino 4,3 kg

Max kapasit 380 kg

Sertifiointi CE



Pelastuspaari Titan SS 32 Wide 1136 kg/400 kg

Titan 32 Wide on maailmanlaajuisesti myydyin tuotteemme suurempien potilaiden hoitoon. Pelastusparilla on kaikki samat toiminnot kuten muissakin Titans-sarjan pelastuspaareissa, mutta se on tehty erityisen leveäksi, jotta se pystyy käsittelemään isompiakin potilaita. Mitta on 32 tuumaa / 81 cm leveä ja tarjoaa lisätilaa erikoistapauksiin, joissa potilaan koko vaatii erilaisen käsittelyn.

Yhdessä uuden Wheel-sarjamme kanssa tämä yhdistelmä on lyömätön maastossa ja vaikeissa ympäristöissä. Kantavuus asennettujen pyörien kanssa on 400 kg. Pyörät (F71W32)

Art.Nr TR110102A

Kork 18 cm


Leveys 81 cm

Pituus 211 cm

Paino 19 kg

Max kapasit 1136 kg (400kg)

Sertifiointi CE

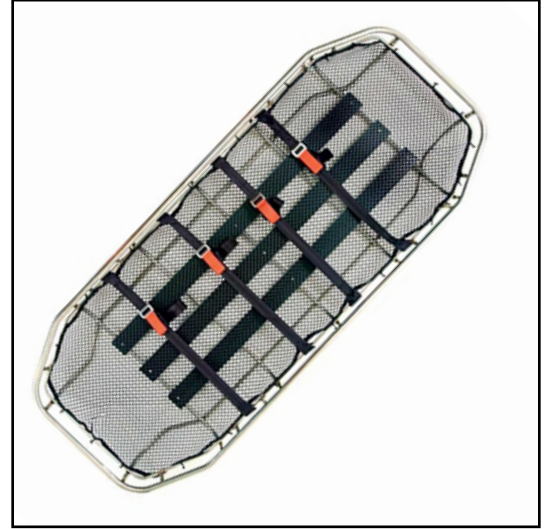

Ferno Surface Extender Split-Kit Scoop® EXL

Ferno Surface Extender Split-Kit Scoop® EXL mahdollistaa Scoop® EXL:n kiinnittämisen Ferno POWERX-, iNX- tai Mondial-ambulanssipareihin. Ferno Surface Extender Split-Kit Scoop® EXL tarjoaa leveämmän potilaspinnaa hieman suurempien potilaiden kuljettamiseen. Muutaman yksinkertaisen vaiheen avulla voit muuttaa ambulanssiparisi sellaisiksi, että ne pystyvät käsittelemään raskaita/obeseja potilaita.

Nopea asentaminen, mikä tekee tavallisesta parista joustavamman ja suuremman kapasiteetin.

Sopii täydellisesti Ferno Transfer Heavy Duty -patjaamme (GE24271050000)

Art.Nr FGB009008250

Kork 5 cm (laukussa)

Leveys 24 cm (laukussa)

Pituus 63 cm (laukussa)

Paino 6,8 kg

Sertifiointi CE





Ferno Norden on Suomen johtavia ensihoidon ja pelastustuotteiden, varoitusvalojen sekä evakuointivarusteiden toimittaja sekä julkiselle, että yksityiselle sektorille.

Ferno Norden Group on ollut olemassa jo yli 40 vuoden ajan ja on aina perustamisestaan lähtien ollut merkittävä toimija ensihoidon ja pelastuksen tuotteiden parissa kaikissa Pohjoismaissa. Me olemme laatu- ja ympäristösertifioituja ISO9001- ja ISO14001-standardien mukaan, jotka antavat meille hyvät ohjaus- ja laatutyökalut mm uusien tuotteiden kehitysprosessissa. Meidän monivuotinen kokemuksemme luo turvaa asiakkaittemme arkeen.

MAA	PUHELIN	SÄHKÖPOSTI	WEB
SWEDEN	+46 520 420 200	fab@fernonorden.com	www.fernonorden.sew
NORWAY	+47 33 03 45 00	fno@fernonorden.com	ww.fernonorden.no
DENMARK	+45 43 62 43 16	fas@fernonorden.com	www.fernonorden.dk
FINLAND	+358 29 1700 454	foy@fernonorden.com	www.fernonorden.fi