



Pelastusvälineet

Me Ferno Nordenilla olemme jo yli 60 vuoden ajan kehittäneet ja valmistaneet pelastukseen sekä potilaskäsittelyyn laitteita. Voidaankin siis sanoa, että se on meidän ydinliiketoimintaamme.

Tuotekehittäelyssä toimimme tiiviissä yhteistyössä ammattikäyttäjien kanssa, jotka työskentelevät pelastuslaitoksilla, ensihoidossa, puolustusvoimissa, poliisissa sekä vapaaehtoisissa järjestöissä. Näissä tehtävissä varusteiden valinta sekä tarve vaihtelevat suuresti.

Tuotteillamme on kaikilla yksi yhteinen piirre; ne ovat laadukkaita ja suunniteltu toimimaan kaikissa pelastustilanteissa mahdollisimman helppokäyttöisesti. Laitteemme on lisäksi suunniteltu niin, että niitä voidaan tarvittaessa yhdistellä toisiinsa tarpeen niin vaatiessa. Esimerkiksi pelastusparimme voidaan yhdistää pelastuspyörien ja kellunta-apuvälineiden kanssa.

Monet tuotteistamme ovat viranomaisten ja terveydenhuollon yksiköiden käytössä useilla eri ammattiryhmillä.

Useissa paikoissa, kuten esimerkiksi teollisuuden tai rakentamisen yksiköissä, toimintaa säätelevät lait ja asetukset ja ne asettavat vaatimukset esimerkiksi riskiarvioinnille sekä pelastautumisvälineille. On tärkeää, että jokaiseen paikkaan on oikeanlaiset välineet ja niiden tulee olla kaikkien ihmisten helposti käsiteltävissä. Onko tiloissa mahdollista tehdä pysty- tai vaakasuoria nostoja tai onko mahdollista tukea loukkaantuneen henkilön niska ja päätä. Voidaanko mahdollinen evakuointi tehdä vapaasti vai pitääkö käyttää kapeita tai korkealla sijaitsevia uloskäyntejä? Tai pitääkö mahdollisesti loukkaantunutta henkilöä siirtää ihmisvoimin pidempiä matkoja.

Nämä ovat useimmiten esiin tulevia kysymyksiä, kun suunnittelemme yhdessä asiakkaamme kanssa pelastusvälineiden tarvetta. Näissä ja kaikissa muissakin kysymyksissä autamme teitä mielellämme.

- **Onko mahdollista tehdä pysty- tai vaakasuoria nostoja?**
- **Pitääkö sinun pystyä kiinnittämään henkilön niska ja selkä loukkaantumisystistä?**
- **Pitääkö evakuointi tehdä kaivojen kautta?**
- **Pitäisikö pelastustehtäviä suorittaa korkealla, esimerkiksi helikopterilla?**
- **Vaihtelevatko pelastustilanteet vai onko kiinteitä asentoja?**
- **Pitäisikö laitteita siirtää pidempiä matkoja käsin?**
- **Kuka hoitaa laitteet?**

Älä epäröi ottaa yhteyttä, jos sinulla on erityisiä kysymyksiä tilanteeseesi ja toimeksiannostasi! Ferno Nordenin tiimi

| | |
|---------------------------|-------------|
| Pelastusparit..... | sivut 3-11 |
| Pyörät | sivut 12-14 |
| Helikopteripelastus | sivu 15 |
| Vesipelastus | sivut 16-17 |
| Tarvikkeet..... | sivut.18-25 |
| Tripodit..... | sivut. 26 |
| Arachnipodi | sivu. 27 |

Pelastuspaari Titanium Tapered

Yksi markkinoiden kevyimmistä pelastuspaareista! Titan-sarjan pelastuspaarit on suunniteltu erityisesti teknisillä pelastustehtävillä. Itse suunnittelu mahdollistaa käyttäjäystävällisen alustan työskentelyyn. Titaanimateriaali vähentää painoa puoleen verrattuna vastaaviin ruostumattomasta teräksestä valmistettuihin paareihin. Siinä on neljä StratLoad™ -kiinnityspistettä, jotka tekevät hihnan kiinnittämisestä nopeaa, helppoa ja turvallista. Nämä kiinnityspisteet suojaavat myös karabiinia seinä- ja vuoristopinnoilta.

Pelastuspaareissa on TIG-hitsattu titaanirunkorakenne

25,4 mm yläputki

Mukana neljä hihnaa

Patentoitu StratLoad™ -toiminto vakiona

Kestävä korkeatiheyksinen polyeteeniverkko (HDPE)

Erittäin kulutusta kestävä takalevy UHMW-PE

Yhteensopiva kaikkien FERNO-rankalautojemme kanssa.

Art.Nr TR110118SL


Kork 19 cm

Leveys 59 cm

Pituus 212 cm

Paino 8 kg

Max kapasit. 11 kN/1136 kg

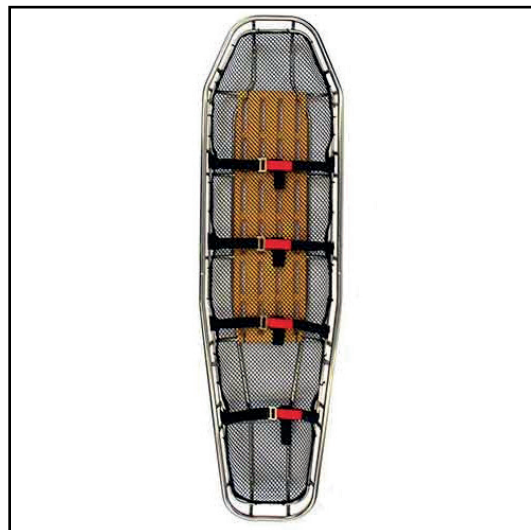

Pelastuspaari Titanium Tapered jaettava

Titan-sarjan pelastuspaarit on suunniteltu erityisesti toimimaan teknisillä pelastustehtävillä. Tämä pelastuspaari on identtinen yllä olevan parin kanssa, paitsi että se on jaettavissa. Syynä jaettavien parien käyttöön voi olla varastointi, liikkuminen, ahdas pelastusympäristö tai vastaava. LocSafe on ainutlaatuinen ominaisuus, joka mahdollistaa nopean ja helpon visuaalisen tarkastuksen varmistaakseen, että kiinnitykset ovat turvallisia koko pelastusprosessin ajan. LocSafe mahdollistaa paareiden kokoamisen tai purkamisen helposti n. 15 sekuntia.

Pelastuspaareissa on TIG-hitsattu titaanirunkorakenne

25,4 mm yläputki

Mukana neljä hihnaa

Patentoitu StratLoad™ -toiminto vakiona

Kestävä korkeatiheyksinen polyeteeniverkko (HDPE)

Erittäin kulutusta kestävä takalevy UHMW-PE

Yhteensopiva kaikkien FERNO-rankalautojemme kanssa.

Art.Nr TR110119SL


Kork 19,4 cm

Lev 60 cm



Pituus 212 cm

Pain 9 kg

Max kapasit 11 kN/1136 kg

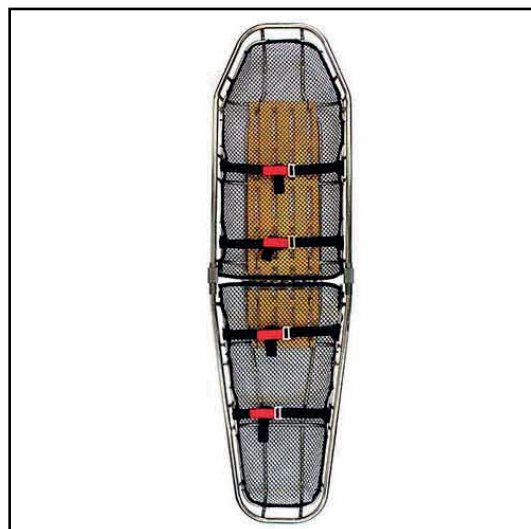

Pelastuspaari SS teräs Tapered

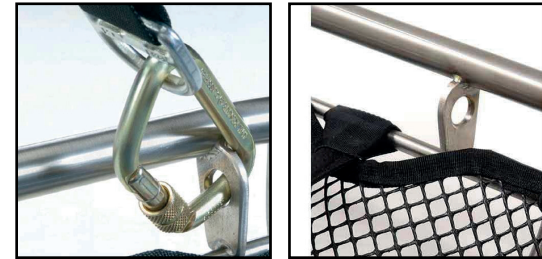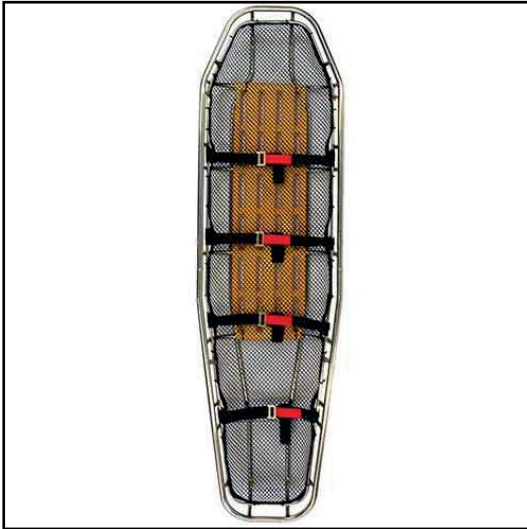

Titan-sarjan pelastuspaarit on suunniteltu erityisesti toimimaan teknisillä pelastustehtävillä. Itse suunnittelu mahdollistaa käyttäjäystävällisen työskentelyn. Siinä on neljä Strat-Load™-kiinnityspistettä, jotka tekevät nostimen kiinnittämisestä nopeaa, helppoa ja turvallista. Nämä kiinnityspisteet suojaavat myös karabiinia seinä- ja vuoristopinnoilta ja muilta.

Pelastuspaareissa on TIG-hitsattu ruostumattomasta teräksestä valmistettu runkorakenne. 25,4 mm yläputki

Mukana neljä hihnaa

Patentoitu StratLoad™-toiminto vakiona

Kestävä korkeatiheyksinen polyeteeniverkko (HDPE)

Erittäin kulutusta kestävä takalevy UHMW-PE

Yhteensopiva kaikkien FERNO-rankalautojemme kanssa.

Art.Nr TR110100A

Kork 19 cm



Lev 59,4

Pituus 212 cm

Pain 14 kg

Max kapasit 11 kN/1136 kg

Pelastuspaari SS Tapered jaettava

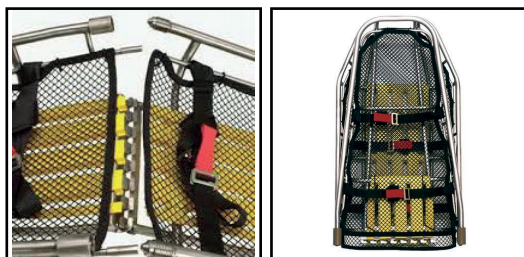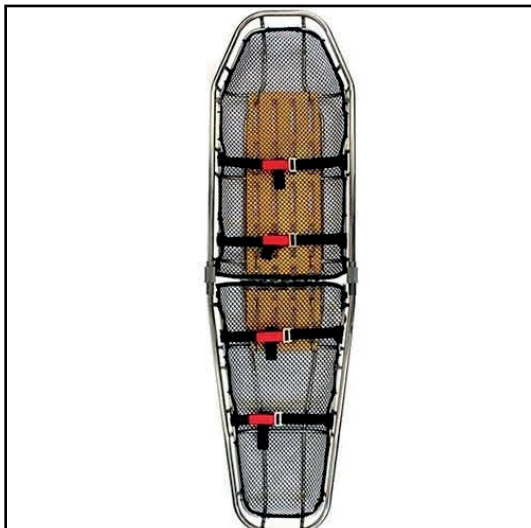

Titan-sarjan pelastuspaarit on suunniteltu erityisesti toimimaan teknisillä pelastustehtävillä. Tämä pelastuspaari on identtinen yllä olevan parin kanssa, paitsi että se on jaettavissa. Syynä jaettavien parien käyttöön voi olla varastointi, liikkuminen, ahdas pelastusympäristö tai vastaava. LocSafe on ainutlaatuinen ominaisuus, joka mahdollistaa nopean ja helpon visuaalisen tarkastuksen varmistaakseen, että kiinnitykset ovat turvallisia koko pelastusprosessin ajan. LocSafe mahdollistaa paareiden kokoamisen tai purkamisen helposti n. 15 sekuntia.

Pelastuspaareissa on TIG-hitsattu ruostumattomasta teräksestä valmistettu runkorakenne.

25,4 mm yläputki

Mukana neljä hihnaa

Patentoitu StratLoad™-toiminto vakiona

Kestävä korkeatiheyksinen polyeteeniverkko (HDPE)

Erittäin kulutusta kestävä takalevy UHMW-PE

Yhteensopiva kaikkien FERNO-rankalautojemme kanssa.

Art.Nr TR110104A

Kork 19 cm

Lev 61,6 cm

Pituus 212 cm

Pain 15 kg

Max kapasit 11 kN/1136 kg

Pelastuspaari Pinnacle Titanium jaettava

Titaanipintapaarit on suunniteltu erityisesti ahtaisiin/suljettuihin tiloihin, josta pitää evakuoida esim. kulkuaukon koko. Sen kevyt paino tarkoittaa, että voit helposti kuljettaa sitä mukana pidemmän matkan. Siinä on myös neljä StratLoad™-kiinnityspistettä, jotka tekevät hihnan kiinnittämisestä nopeaa, helppoa ja turvallisempaa. Paarit on irrotettavissa ja ainutlaatuinen LocSafe-toiminto mahdollistaa täysin kiinteän yhteyden paarien kahden osan välille. LocSafe-toiminto mahdollistaa nopean ja helpon visuaalisen kiinnityksen. LocSafe mahdollistaa paarien kokoamisen tai purkamisen helposti n. 15 sekuntia. Pelastuspaareissa on TIG-hitsattu titaanirunkorakenne.

25,4 mm yläputki

Mukana neljä hihnaa

Patentoitu StratLoad™-toiminto vakiona

Kestävä korkeatiheyksinen polyeteeniverkko (HDPE)

Erittäin kulutusta kestävä takalevy UHMW-PE

Yhteensopiva kaikkien FERNO-rankalautojemme kanssa.

Art.Nr TR114001



Kork 18,4 cm

Lev 49,5 cm

Pituus 209,5 cm

Pain 8 kg

Max kapasit 4 kN/408 kg

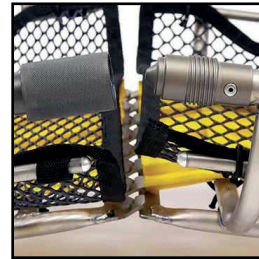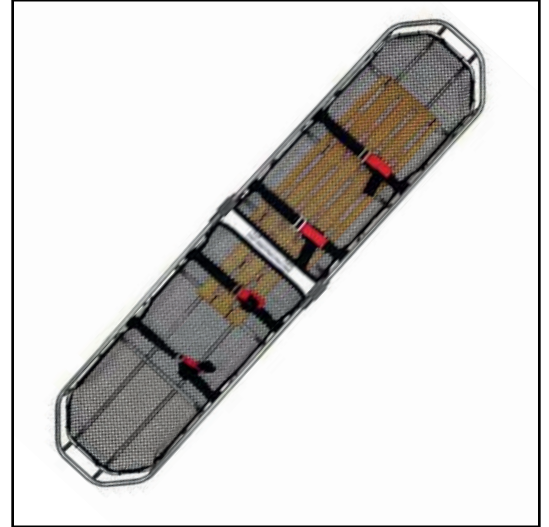

Pelastuspaari Advantage oranssi

Advantage on muiden markkinoilla olevien muovisten pelastuspaarien kehitynein versio. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu runko tarjoaa vahvan rakenteen yli 1 tonnin kantavuudella. Paarien pohjassa on sileä liukupinta, joka on valmistettu kestävästä korkeatiheyspolyeteenistä (HDPE). Sisätila on valmistettu suljetusta vaahtomuovista, mikä tuo hygieenisää etuja, koska se ei päästä nestettä sisään ja on helppo puhdistaa. Samalla se tarjoaa kuljetettavalle miellyttävän mukavuuden. Siinä on myös neljä StratLoad™-kiinnityspistettä, jotka tekevät hihnan kiinnittämisestä nopeaa, helppoa ja turvallisempaa. Nämä kiinnityskohdat suojaavat karabiinia seinä- ja vuoristopinnoilta jne.

Paari niille, jotka haluavat laadukkaat pelastuspaarit kestäväällä pohjalla!

25,4 mm yläputki

Mukana neljä hihnaa

Patentoitu StratLoad™-toiminto vakiona

Yhteensopiva kaikkien FERNO-rankalautojemme kanssa.

Art.Nr TR110125A

Kork 18,5 cm


Lev 61cm

Pituus 216 cm

Pain 15,6 kg

Max kapasit 11 kN/1136 kg



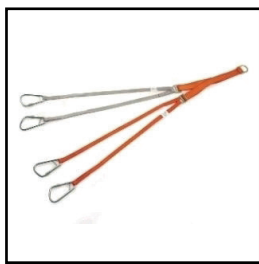

Pelastuspaari Ferno M71 Oranssi

Yksi kaikkien aikojen myydyimmistä pelastuspaareistamme. Sopiva useimpiin pelastustilanteisiin. Malli 71 on valmistettu tiheästä polyeteenistä, jota tukee vahva alumiinirunko, mikä tekee siitä helpomman käsitellä epätasaisessa maastossa. Ennen kaikkea etu, kun haluat pystyä liuttamaan helposti epätasaisella pohjalla. Sisäosassa on pehmeä pehmuste, joka lisää mukavuutta ja joka on helppo puhdistaa. Mukana neljä hihnaa, joita voidaan tarvittaessa siirtää pelastustilanteen niin vaatiessa.

Valmiit kiinnikkeet tyyppihyväksytyihin nostoliinoiniin. Nostovaljaat myydään erikseen (F4181).

| | |
|--------------------|--------|
| Art.Nr | F071 |
| Kork | 20 cm |
| Lev | 61 cm |
| Pituus | 218 cm |
| Pain | 10 kg |
| Max kapasit | 272 kg |

Pelastuspaari Ferno M71 jaettava Oranssi



Sopii useimpiin pelastustilanteisiin. Malli 71S on jaettavissa ja valmistettu tiheästä polyeteenistä, jota tukee vahva alumiinirunko, mikä helpottaa käsittelyä epätasaisessa maastossa. Sisäosassa on pehmeä pehmuste, joka lisää mukavuutta ja joka on helppo puhdistaa. Mukana neljä hihnaa, joita voidaan tarvittaessa siirtää pelastustilanteen niin vaatiessa. Tämän jaettavan mallin valitsevat ne, joiden on siirrettävä tai säilytettävä pelastuspaarit helpolla tavalla.

Valmiit kiinnikkeet tyyppihyväksytyihin nostoliinoiniin. Nostovaljaat myydään erikseen (F4181).

| | |
|--------------------|--------|
| Art.Nr | F071S |
| Kork | 20 cm |
| Leveys | 61 cm |
| Pituus | 218 cm |
| Pain | 11 kg |
| Max kapasit | 272 kg |

Pelastuspaari Teräs 32 Wide

Pelastuspaari 32 Wide on myydyin tuotteemme maailmanlaajuisesti. Sopii isompien potilaiden käsittelyyn. Pelastuspaarissa on kaikki päätoiminnot kuten sarjan muissakin pelastuspaareissa, mutta se on tehty erityisesti suurempien potilaiden käsittelyyn. 32 tuuman/81 cm leveys tarjoaa lisätilaa niihin erikoistapauksiin, joissa potilaan koko vaatii erilaisen käsittelyn. Ainutlaatuisia ominaisuuksia ovat 25,4 mm:n yläputki, joka tekee siitä tukevan, verrattuna pienempiin putkirunkoihin. Siinä on myös neljä patentoitua StratLoad™-kiinnityspistettä, jotka tekevät hihnan kiinnittämisestä nopeaa, helppoa ja turvallisempaa. Nämä kiinnityskohdat suojaavat karabiinia seinä- ja vuoristopinnoilta jne. Vahvasta, tiheästä polyeteenistä valmistettu verkko päästää veden ja ilman helposti läpi, mikä helpottaa pelastustehtävää. Yhdessä uuden pyöräsarjamme (sivu 14) kanssa tämä yhdistelmä on lyömätön maastoajoon ja vaikeisiin olosuhteisiin. Kantavuus asennettujen pyörien kanssa on 400 kg.

Art.Nr TR110102A


Kork 19 cm

Leveys 81 cm

Pituus 212 cm

Pain 19 kg

Max kapasit 11 kN/1136 kg

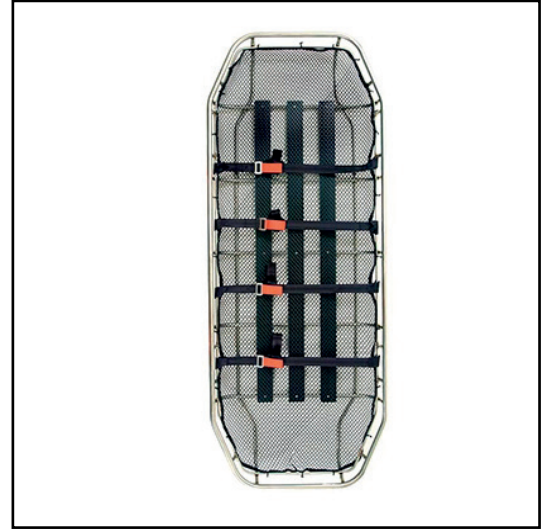

Pelastuspaari Gazelle

Gazelle on täyshitsattu hiiliteräsrakenne, joka on tarkoitettu pelastustoimiin perustasolla. Gazelle pystyy kuitenkin selviytymään siitä, mitä voit odottaa pelastuspaareilta sen kantavuuden perusteella. Gazellen avulla tarjoamme erittäin edullisen vaihtoehdon teollisuudelle, ensiapu- ja pelastuspaareja tarvitseville organisaatioille, jotka eivät suorita teknisiä tehtäviä. Gazelle Rescue Stretcher -paareissa on hiiliteräksinen, MIG-hitsattu runkorakenne ja se on suunniteltu täyttämään tarpeen siellä, missä käyttäjät eivät tarvitse kehittyneitä pelastuspaareja niiden lujuuden tai kestävyuden vuoksi.

Mukana kolme hihnaa.

Kestävä korkeatiheyksinen polyeteeniverkko (HDPE)

Art.Nr TR110105


Kork 18 cm

Leveys 62 cm


Pituus 210 cm

Pain 15 kg

Max kapasit 4 kN/408 kg

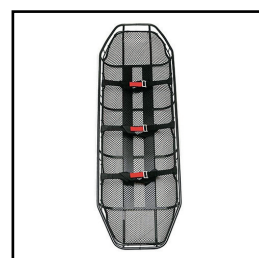

Pelastuspaari Spartan Teräs jaettava

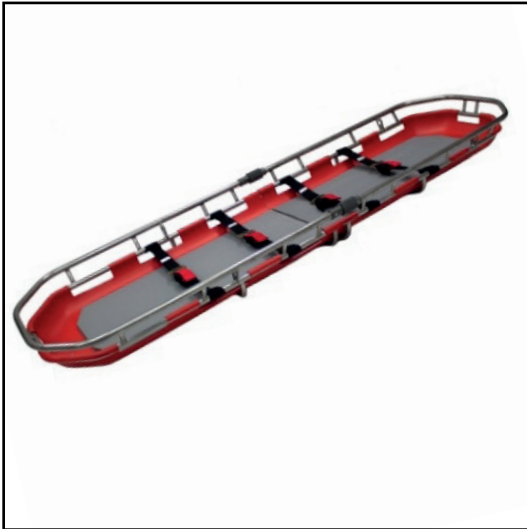

Spartan on uusi muovista ja teräksestä jaettava pelastuspaarimme, jossa on patentoitu LocSafe-järjestelmämme ja StratLoad™-kiinnityspisteet. Parit on jaettavissa ja ainutlaatuinen LocSafe-toiminto mahdollistaa täysin kiinteän liitoksen parien kahden osan välille ilman, että tapit tai putket liukuvat toisiinsa. LocSafe on ainutlaatuinen ominaisuus, joka mahdollistaa nopean ja helpon visuaalisen tarkastuksen varmistaakseen, että yhteydet ovat turvallisia koko pelastusprosessin ajan. LocSafe mahdollistaa paareiden kokoamisen tai purkamisen helposti n. 15 sekuntia.

Runkorakenne terästä.

Yläkisko on kokonaan esillä, joten kahvoja ei tarvitse etsiä, jotta paarista saadaan hyvä ote.

19,8 mm yläputki

Mukana neljä hihnaa

Patentoitu StratLoad™-toiminto vakiona

Art.Nr TR110127A

Kork 18 cm


Leveys 63 cm

Pituus 218 cm

Paino 16 kg

Max kapasit 11 kN/1136 kg

Pelastuspaari Spartan Titanium jaettava

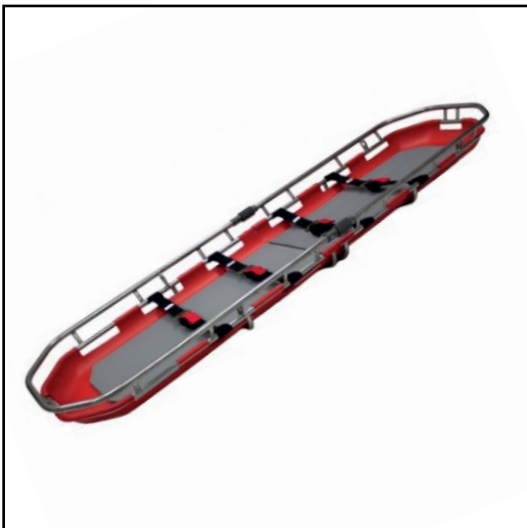

Spartan on uusi jaettavissa oleva muovirakenteinen ja titaaninen pelastuspaarimme, jossa on patentoitu LocSafe-järjestelmämme ja StratLoad™-kiinnityspisteet. Tämän ja yllä olevan parin välinen ero on materiaali ja siten myös paino. Parit on jaettavissa ja ainutlaatuinen. LocSafe-toiminto mahdollistaa täysin kiinteän liitoksen parien kahden osan välille ilman, että tapit tai putket liukuvat toisiinsa. Ominaisuus mahdollistaa nopean ja helpon visuaalisen tarkastuksen sen varmistamiseksi, että liitännät ovat turvallisia koko pelastusprosessin ajan. LocSafe mahdollistaa paareiden kokoamisen tai purkamisen helposti n. 15 sekuntia.

Runkorakenne titaania.

Yläkisko on kokonaan esillä, joten ei tarvitse etsiä kädensijaa saadaksesi hyvän otteen paarista.

19,8 mm yläputki

Mukana neljä hihnaa

Patentoitu StratLoad™-toiminto vakiona

Art.Nr TR110127TI

Kork 18 cm

Leveys 63 cm

Pituus 218 cm

Pain 11 kg

Max kapasit 11 kN/1136 kg

Pelastuspaari Traverse Rescue Stretcher

Traverse Rescue Stretcher (TRS) on suunniteltu sekä pysty- että vaakasuoraan evakuointiin. TRS on kevyt rakenne, joka rullautuu helposti kasaan ja säilytetään mukana tulevassa pussissa. Kaikki hihnat on ommeltu paariin. TRS on käytännöllinen ahtaissa tiloissa ja kun joudut viemään paarit maastoon ja tarvitset pienen kuorman painon. TRS-muotoilu tarkoittaa, että paarit sulkeutuvat, jos potilas tarvitsee paremman suojan ulkoisia tekijöitä vastaan. Valmistettu Cordurasta.



Art.Nr TR190100

Leveys 82 cm


Pituus 201 cm

Pain 6 kg

Max kapasit V: 250 kg H:350 kg

Pelastuspaari Ferno Life Saver

Ferno LifeSaver on moderni versio perinteisestä Neil Robertson parista. Se on suunniteltu sekä nopeaksi että helppokäyttöiseksi vaaka- ja pystysuuntaisissa nostotilanteissa, joissa kevyt paino on etusijalla. Kompakti, rullaava rakenne helpottaa paarien säilyttämistä ja kuljettamista. LifeSaver Rescue -paareissa on integroidut jalka- ja vartaloläpät, jotka kietoutuvat potilaan ympärille kuin perinteinen korsetti. Tätä täydentävät yksinkertainen päätuki, viisi sisäänrakennettua potilastukea ja pitkä jalkahihna.

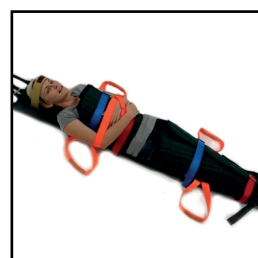

Art.Nr FWELS

Kork 3 cm

Leveys 105 cm

Pituus 163 cm

Pain 5 kg

Max kapasit 159 kg

Ferno XT PRO Extrication



FERNO® XT PRO on uudempi tuote, joka on kehitetty poistamaan potilaat nopeasti ja turvallisesti ahtaista tiloista ja samalla tarjoamaan tuen niskaan ja selkään.

XT PRO perustuu samaan konseptiin kuin Ferno XT. Erona on, että PRO on suunniteltu sekä pään/niskan/selän tuentaan, että nostomahdollisuuteen. Testattu EN 1498 mukaan.

Siksi tämä on oikea tuote, kun haluat nostaa henkilöä turvallisesti pystysuoraan ahtaasta tilasta. Koska kiinnityskohta on suoraan pään yläpuolella, voit helposti nostaa henkilön pois kaivoista ja muista ahtaista tiloista.

| | |
|----------------------|-----------|
| Art.Nr | F126XTPRO |
| Kork | 6 cm |
| Leveys | 30 cm |
| Pituus | 83 cm |
| Pain | 3,4 kg |
| Max kapasit | 160 kg |
| Certifisering | EN1498 |

Evakointipaari Ferno KED PRO



Ferno® KED® PRO on erittäin hyvä vaihtoehto, kun halutaan rajoittaa potilaiden liikkumista, joka on poistettava suljetuista tiloista. Lasta tukee niska ja selkä. Takana olevat kahvat ja useat hihnat tarjoavat useita vaihtoehtoja siirtämiseen. Fernon KED®Pro on perinteisen KED®:n jatkokehitysmalli. Kaikki uudet ominaisuudet tekevät KED®PRO:sta hyvän valinnan varusteiksi ammattimaisiin evakointi- ja pelastusoperaatioihin. KED®PRO:ssa on kolme pienempää päätyynyä, jotka lisäävät joustavuutta ja mukautuvat potilaaseen. Siksi tämä on oikea tuote, kun sinun on nostettava turvallisesti ahtaasta tilasta.



Lisävarusteet: Ferno Ked -nostovaljaat on suunniteltu käytettäväksi potilaiden pystysuoraan pelastamiseen KED PRO -yksiköllä.

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Art.Nr | F125PRO |
| Kork | 3,5 cm |
| Leveys | 82 cm |
| Pituus | 83 cm |
| Pain | 4,5 kg |
| Max kapasit | 250 kg vertikaali pelastus 150 kg |

Pelastuspaari Paraguard™ Excel

Paraguard on suunniteltu etsintä- ja pelastusoperaatioihin, koska se on kompakti ja monipuolinen paari. Sitä voidaan käyttää tuhoutuneissa rakennuksissa, teollisuusonnettomuuksissa tai ahtaiden tilojen pelastamisessa. Paraguard™ Excel on nopea ja helppokäyttöinen. Eri hihnat rintakehän, käsivarsien, reisien ja säärien kiinnittämiseen. Pää pysyy paikallaan 3-pisteisellä, liukumattomalla tuella. Erityisen hyödyllinen pystysuorassa pelastuksessa. Paraguard™ on ollut Naton virallinen pelastuspaari toisesta maailmansodasta lähtien. Lisätarvikkeet:

FGB010773001 Paraguard 4-pistenostohih.
FGB10772801 Paraguard Excel-hihnat, pari
FGB6090037 Paraguard kantokahva

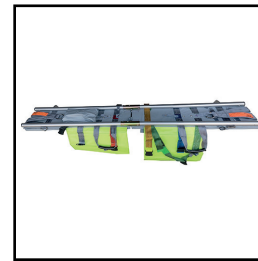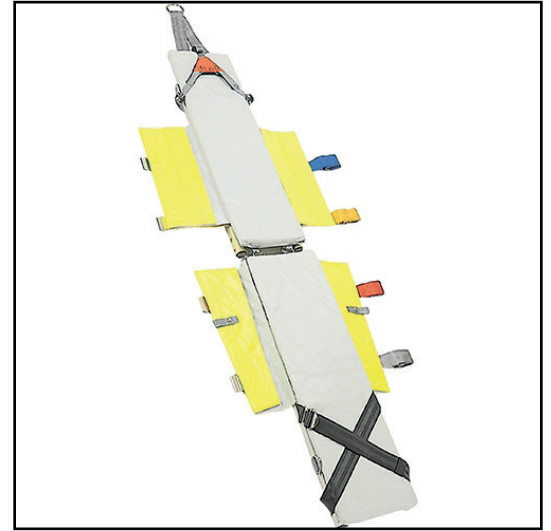

Art.Nr FGB6092003

Leveys 25 cm

Pituus 182 cm

Paino 11,5 kg

Max kapasit 136 kg

Pelastuspaari Armeija kokoontaitettava oranssi

Klassiset parit, joita kutsutaan myös armeijan pariksi. Armeijan parit ovat helppoja käyttää, ja joka sopii täydellisesti ympäristöihin, joissa sinun on voitava evakuoida.

Helppo säilyttää, koska se voidaan taittaa sekä pituus- että leveysuunnassa.

Armeijapaarit on päällystetty vahvalla nailonpäällysteisellä vinyylillä, mikä tekee siitä kestävä, helpon pitää puhtaana ja huoltaa eri ympäristöissä.

Lisätarvikkeet:

F4312BLACK- Musta vyö muovisoljella



Art.Nr S2108AF206

Kork 14 cm


Leveys 55 cm

Pituus 206 cm

Pain 6 kg

Max kapasit 159 kg

Pelastuspaarinalusta Traverse Mule II

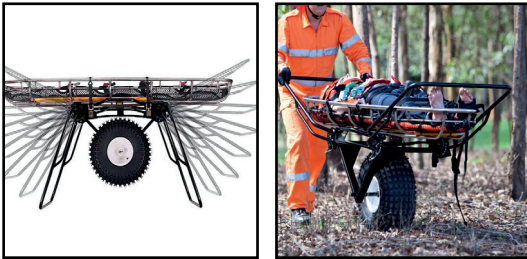

Mule II sopii maastoon. Kahdeksan eri asennon ansiosta voit mukauttaa helposti vallitsevaan maastoon ja pelastustyöntekijöiden välillä. Universaali muotoilu, joka on yhteensopiva kaikkien pelastuspariemme kanssa. Mule II ratkaisee tehtäväsi ja auttaa työskentelemään ergonomisesti riippumatta siitä, onko kyseessä hiekkaranta, kapeita polkuja, joissa on juuria tai jyrkkiä rinteitä. Yksipyöräinen rakenne sopii hyvin kapeille poluille ja tarjoaa ketteryyttä ja monipuolisuutta myös epätasaisessa maastossa. Suuri ja kevyt ATV-pyörä tarjoaa paremman liikkuvuuden, iskunvaimennuksen ja mukavuuden. Pikahihnajärjestelmä, jolla parit kiinnitetään helposti ja turvallisesti kahdella koukulla kummaltakin puolelta. Kompakti koko säilytykseen. P 84cm - L 66cm - K 48cm.

Art.Nr TR112220

Kork 74 cm

Leveys 70 cm

Pituus 244 cm

Pain 21 kg

Max kapasit 227 kg

Pelastuspaarinalusta F071/M71S



Pyörien kiinnittäminen pelastuspareihin on ominaisuus, jota arvostavat kaikki, jotka työskentelevät pelastustehtävillä maastossa. Nyt voit helposti kuljettaa pelastusparit vaikeammassa maastossa ja pitkiä matkoja. Pelastuspyörät voidaan kiinnittää pelastuspariemme F071 ja F071S jalkapäähän muutamalla yksinkertaisella liikkeellä. Karkeat renkaat 25 cm takaa tasaisen ajon myös kuoppaisessa maastossa. Pyöräsarja on kiinnitetty pelastusparien jalkaosaan neljällä pikakiinnikkeellä.

Art.Nr F071W-V

Kork 32 cm

Leveys 68 cm

Pituus 60 cm

pain 5,1 kg

Max kapasit 280 kg

Pelastuspaarinalusta Tirol kit tapered titan

Erityisesti suunniteltu titaanirunkoinen alusta Titan-sarjan pelastuspaareihimme. Rakenne tarjoaa erittäin kevyen järjestelmän, joka voidaan purkaa, kuljettaa pidemmälle ja jota voidaan käyttää haastavissa pelastusoperaatioissa vaikeapääsyisessä maastossa.

Koko pyöräjärjestelmän kokonaispaino on vain 12 kg!

Tarvikkeet parien ja Tirolkitin kantamiseen:

F102916001 Reppuvaljaat Titan Splitille 1 kpl.



TIROL-KIT kartiomainen Soveltuu kartiomaisille paareillemme:

TR110100A Pelastuspaarit, Ferno Titan SS (teräs) kartiomainen

TR110104A Pelastuspaarit, Ferno Titan SS (teräs) jaettavissa kartiomainen

TR110118SL Pelastuspaari, Ferno Titan-Ti (Titan) kartiomainen titaani

TR110119SL Pelastuspaari, Ferno Titan-Ti (Titaaninen) jaettavissa.

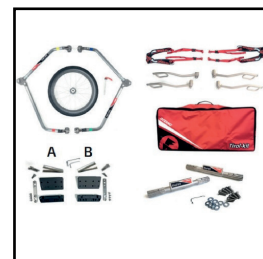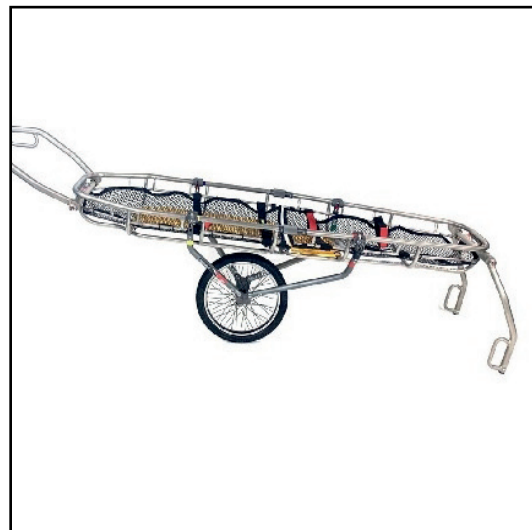

Art.Nr TR2100034

Kork 128 cm med bår

Leveys 61 cm med bår

Pituus 332 cm

Pain 12 kg

Max kapasit 225 kg

Pelastuspaarinalusta Tirol kit regular titan

Erityisesti suunniteltu titaanirunkoinen alusta Titan-sarjan pelastuspaareihimme. Rakenne tarjoaa erittäin kevyen järjestelmän, joka voidaan purkaa, kuljettaa pitemmälle ja jota voidaan käyttää vaativissa pelastusoperaatioissa vaikeapääsyisessä maastossa.

Koko pyöräjärjestelmän kokonaispaino on vain 12 kg!

Tarvikkeet parien ja Tirolkitin kantamiseen selässä:



F102916001 Reppuvaljaat Titan Splitille 1 kpl.

TIROL-KIT Regular Sopii suoraan mallipaareihimme:

TR110101A Pelastuspaarit, Ferno Titan SS (Steel) suora malli

TR110115SL Pelastuspaarit, Ferno Titan-Ti (Titan) jaettavissa, Suora malli

Titanium

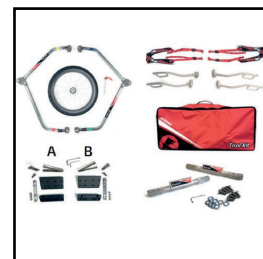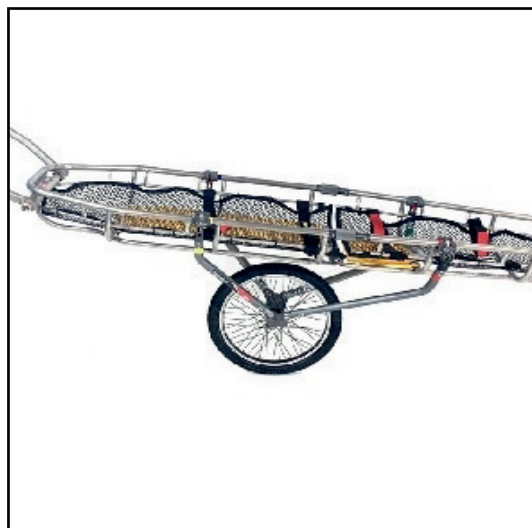

Art.Nr TR2100035

Kork 128 cm med bår

Leveys 61 cm med bår

Pituus 332 cm

Pain 12 kg

Max kapasit 225 kg

Pelastuspaarinalusta Ferno Titan SS32 Wide



Pyörien kiinnittäminen pelastuspaareihin on ominaisuus, jota arvostavat kaikki ja jotka työskentelevät pelastustehtävillä maastossa. Nyt voit helposti kuljettaa painavampiakin vaikeassa maastossa ja pitkiä matkoja. Pelastuspyörät voidaan kiinnittää leveimmän pelastusparimme, Ferno Titan SS 32 Widen, jalkapäähän muutamalla yksinkertaisella toiminnolla. Karkeat 25 cm renkaat takaavat tasaisen liikkeen myös kuoppaisessa maastossa.

Art.Nr F71W32

Kork 48 cm




Leveys 94 cm

Pituus 70 cm

Pain 15,2 kg

Max kapasit 400 kg

Pelastuspaarinalusta Porter

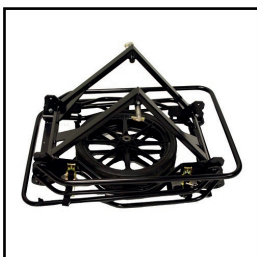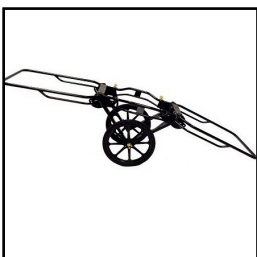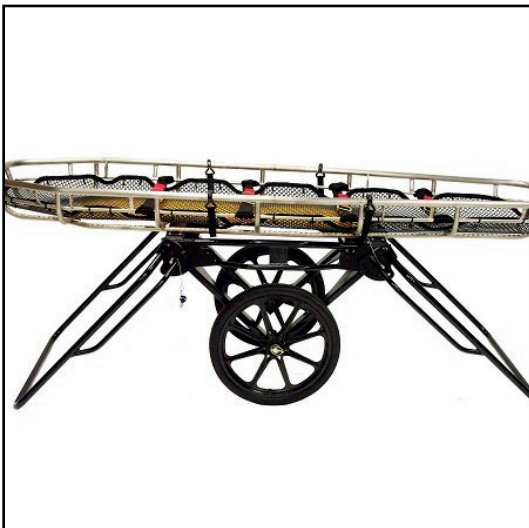

Porter selviytyy maastosta. Kahdeksan eri asennon ansiosta voit muokata asentoa helposti: maaston ja pelastushenkilökunnan välillä. Universaali muotoilu, joka on yhteensopiva kaikkien pelastuspariemme kanssa. Porter ratkaisee tehtäväsi ergonomisesti. Kahvojen pikaliittimet helpottavat asennon vaihtamista. Pyörä voidaan irrottaa nopeasti, helposti ja jalusta voidaan taittaa kompaktiin säilytykseen. Pikahihnajärjestelmä, jolla parit kiinnitetään helposti ja turvallisesti kahdella koukulla kummaltakin puolelta.

Art.Nr TR112224

Kork 74 cm

Leveys 66 cm

Pituus 244 cm

Pain 23 kg

Max kapasit 227 kg


Pelastuspaari Ferno Searbag III

Searbag III on suunniteltu pelastamaan ja kuljettamaan loukkaantunut potilas vaikeasta ympäristöstä. Se on helppo yhdistää Ferno Scoop -parien, Ferno Spineboardin tai Ferno-tyhjiöpatjan kanssa, joka voidaan asettaa Searbag III:een ja sitten nostaa vinssillä ja/tai köysillä.

Searbag III on valmistettu erittäin kestävästä kankaasta, joka ei läpäise vettä ja jossa on kolminkertainen pinnoite kulumisen välttämiseksi. Alapuoli on suunniteltu optimaalista repeytymis- ja hankauskestävyyttä varten, jotta sitä voidaan vetää karkeilla tai epätasaisilla pinnoilla. Siksi se sopii kaikkiin hätätilanteisiin ja ympäristöihin.

Searbag III on testattu EASA CS 29.865 a), amdt. III.

Siinä on kaksi EARS-kiertymisen estävää liinaa, yksi kummallakin puolella. Estävät helikopterin liikkeen aiheuttamat pyörimiset pelastusoperaation aikana.

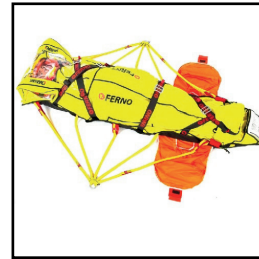

Art.Nr F065SEAR

Leveys 60 cm

Pituus 200 cm

Pain 5 kg


Max kapasit 160 kg

EARS antirotationliina

EARS on suunniteltu erityisesti ohjaamaan helikopterin liikkeen aiheuttamaa pyörimistä pelastusoperaatioiden aikana.

Kiertymisenestoliinat minimoivat helikopterin aiheuttamat pyörimisliikkeet, jotka voivat olla vaarallisia pelastusoperaation aikana. EARS on valmistettu lujasta, matalahuukoisesta polyamidista. Tämä lisää tehokkuutta käytön aikana, ja se on nopea ottaa käyttöön vetämällä integroidusta kahvasta.

Ergonominen intregoitu kahva helpottaa käsittelyä käytön aikana. Kahdeksan kiinnityshihnaa yleiskäyttöön - yhteensopiva koko Ferno-parien kanssa. EARS säilytetään integroidussa taskussa ja avautuu nopeasti.

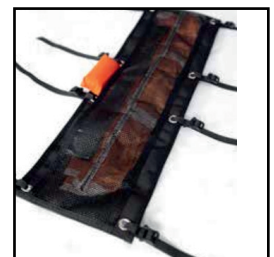

Art.Nr F-EARS

Kork 1 cm

Leveys 43 cm

Pituus 49 cm

Pain 0,2 kg

Pelastuspaari PXB Pool Extrication Board





Pool Extrication Board, PXB, on suunniteltu erityisesti hengenpelastajien suorittamaan nopeaan, tehokaseen ja turvalliseen pelastamiseen vedestä. Se on erityisen tehokas altaissa, joissa reuna voi muutoin vaikeuttaa hädässä olevan nopean pelastamisen. Sen kelluvuus pitää hätäänntyneen pinnalla. Hihnat ja pääpalat mahdollistavat sen, että voit myös helposti tukea henkilöä tarvittaessa.

Takana oleva kiinteä matto tarjoaa hyvän vakauden pelastushenkilöstölle altaan reunalla ja on samalla hyvä apuväline hädässä olevan ergonomiseen nostamiseen vedestä nopeasti.

| | |
|--------------------|-------------|
| Art.Nr | FGB10776700 |
| Kork | 4 cm |
| Leveys | 40 cm |
| Pituus | 182 cm |
| Pain | 10 kg |
| Max kapasit | 182 kg |

Pelastuspaari Ferno XT Floating

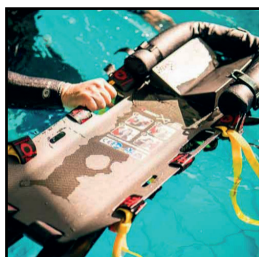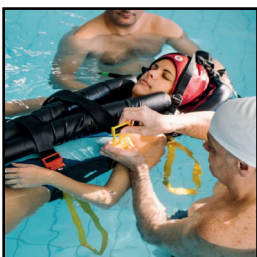

Ferno XT Floating on kevyt ja joustava tute vedestä pelastamiseen. Kevyt paino ja joustava muoto tekevät siitä helpon apua tarvitsevalle. Sen kevyt rakenne tekee XT-Floatingin asettamisen helpoksi kehon alle. Mukana kiinnityshihnat ja kelluntavälineet. Voit helposti vetää hädässä olevan henkilön maihin kyljessä olevilla nauhoilla/ silmukoilla. Tuote voidaan ripustaa näkyvästi seinälle tai helposti pakattavissa mukana tulevaan pussiin. Kellunta-apuvälineet pitävät pään vedenpinnan yläpuolella ja kääntävät automaattisesti henkilön kasvot ylös päin.

| | |
|--------------------|-------------|
| Art.Nr | F126XTFLOAT |
| Kork | 11 cm |
| Leveys | 35 cm |
| Pituus | 120 cm |
| Pain | 3,3 kg |
| Max kapasit | 160 kg |

Kellukkeet pelastuspaariin

Traverse Rescuen kevyt kelluke on hyvä apu vedestä pelastettaessa. Se on erittäin joustava. Kaksiosainen rakenne mahdollistaa sen nopean kiinnittämisen useisiin erilaisiin pelastuspaareihin. Kantavuus 29,5 kg pitää potilaan pinnalla. Kellukkeet voidaan kätevästi säilyttää paareissa. Yhteensopiva pelastuspaariemme Model 71, Gazelle-sarjan, Titan-sarjan ja Advantage-pelastuspaarien kanssa. Materiaali PVC-pinnoitettua polyesteriä.


Art.Nr TR110124A

Kork 20 cm

Leveys 10 cm

Pituus 130 cm

Pain 1,4 kg

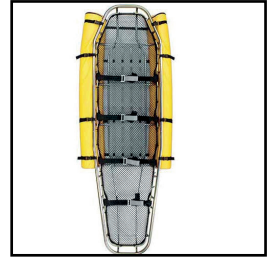

Meripelastuspatja

Meripaarit on hyväksi havaittu, laadukas pelastusväline, evakointiin ja liikkumiseen meriympäristöissä. Meripaarit on toisen sukupolven meripelastuspatja, joka on nyt päivitetty ja parannettu pelastustyökalu. Sen alkuperäinen malli on ollut käytössä Ruotsin laivastossa yli 30 vuoden ajan. Meripaarit on yhdistelmätuote, joka mahdollistaa evakuoinnin ahtaissa ympäristöissä merialuksilla. Samalla se suojaa siirrettävää henkilöä. Meripaareissa on seitsemän kahvaa molemmilla pitkillä sivuilla ja kolme kahvaa pään ja jalan päässä. Monien kahvojen ansiosta saat helposti hyvän otteen ja näin autat liikuttelua. Parannetun kelluvuuden ansiosta on myös helpompi käsitellä henkilöä, joka saattaa päätyä veteen evakuoinnin aikana. Kantavuus, jopa 140 kg. Takaosa on vahvistettu kulumisen vähentämiseksi.

Art.Nr GE22201811410

Kork 6,5 cm

Leveys 103 cm


Pituus 223 cm

Pain 10,5 kg

Max kapasit 200 kg/ kellunta140 kg



Rankalauta NAJO® Redihold® 41 cm

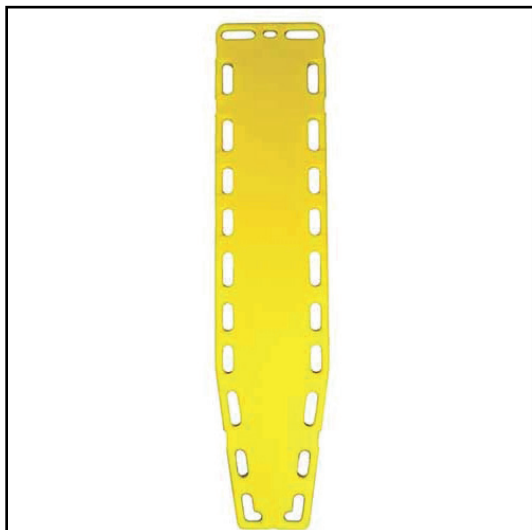


NAJO® Redihold® on monipuolisin rankalauta, joka meillä on. Laudan ympärillä olevat monet kahvat helpottavat sopivan otteen löytämistä. NAJO® Redihold® -rankalaudan kelluvuus on 62 kg, joten sitä käytetään usein vesipelastuksessa. Se on vankka rakenne, joka kestää kovia olosuhteita, eikä siinä ole aukkoja, jotka voisivat vuotaa vettä.

Lisätarvikkeet:
F445 - Yleisniskatuki
GEAS405 - X-vyöt

| | |
|--------------------|------------|
| Art.Nr | FNAJO01205 |
| Kork | 4,5 cm |
| Leveys | 41 cm |
| Pituus | 183 cm |
| Pain | 7 kg |
| Max kapasit | 272 kg |

Ferno Scoop® EXL keltainen 227 kg

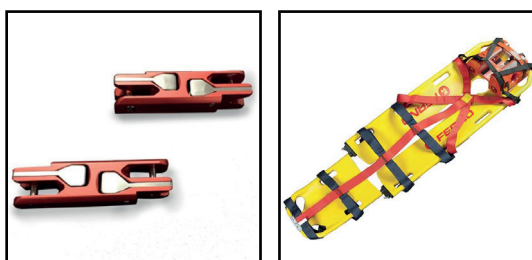

SCOOP® EXL on epäilemättä suosituin tuotteemme tukemiseen, mutta myös tilanteisiin, joissa joudut siirtämään loukkaantunutta. Tärkeä varustus, kun henkilö on siirrettävä paareille ilman liiallista liikettä. Ainutlaatuinen TSL-lukko, pyöristetyt kulmat ja sen ergonomiset kahvat tekevät Scoop® EXL:stä ylivoimaisen. Ambulanssi käyttää päivittäin Scoop® EXL:ää, ja se voi tarvittaessa jäädä loukkaantuneen alle röntgen-, CT- ja magneettikuvantamiseen asti.

Kauhapaarit voidaan laajentaa Extender-sarjalla TSL, samalla kantavuudella. Extender kit TSL (F0832274)

Lisätarvikkeet:
GEAS405 - X-vyöt
F00022 - Niskatuen B-lukko

| | |
|--------------------|------------|
| Art.Nr | F065EXL |
| Kork | 8 cm |
| Leveys | 43 cm |
| Pituus | 165-201 cm |
| Pain | 8 kg |
| Max kapasit | 227 kg |

Tyhjiölasta Rescue Lite R2G

Rescue Lite Full Body Splint on kehitetty yhdessä vuoristopelastushenkilöstön kanssa. Kyky liikkua vaikeassa maastossa ja kyky tarjota parasta hoitoa paikan päällä asettaa tuotteelle korkeat vaatimukset. Kevyt, helppo kuljettaa, yhteensopiva muiden pelastusvarusteiden kanssa, ergonominen käyttäjille ja turvallinen loukkaantuneille!

Patja on pakattu reppuun, mikä helpottaa työskentelyä, jos sitä pitää kantaa.

Rescue Lite on suunniteltu erittäin helppokäyttöiseksi pelastuspariemme kanssa.



Art.Nr GE23271513001

Kork 4 cm

Leveys 131 cm

Pituus 200 cm

Paino 6 kg

Max kapasit 220 kg

Tyhjiöpatja Germa EasyFix Plus II

EasyFix PLUS II:ssä on ainutlaatuinen muotoilu, joka tarjoaa paremman tuen päälle ja kaulalle ilman niskatukea. Ainutlaatuinen muotoilu helpottaa myös hengitysteiden hallintaa. EasyFix PLUS:n yläosassa on vahvistettu pohjalevy, joka lisäksi tukee kaularankaa. Ainutlaatuinen rakenneominaisuus yhdessä kiinnityshihnojen kanssa tarjoavat paremman tuen kuin perinteiset tyhjiöpatjat. Tällä on helppo tapa varmistaa, että loukkaantuneen tuki kuljetuksen aikana on vakaa ja hyvä!

Nykyään tyhjiöpatja on myös ergonominen apuväline.

Sillä voi liikuttaa loukkaantunutta mahdollisimman monien kahvojen ja vahvistetun pohjan ansiosta.

Jopa 250 kg painavia ihmisiä voidaan siirtää portaissa tai tasaisella alustalla.



Art.Nr GE23271511001

Kork 4,5 cm

Leveys 130/72 cm

Pituus 208 cm

Pain 8,7/10,5 kg

Max kapasit 250 kg



Rescue Pillow on käytännöllinen tyyny, joka sopii täydellisesti pelastuspaareihin. Tyyny on kiinnitetty tarranauhalla, jotta se pysyy paikallaan. Tyynyllä on kaksi toimintoa. Jos otat tyynyn sisällön pois, saat tilalle kevyen ja lämmittävän fleecipeiton.

Art.Nr TR700YP

Leveys 150 cm filt

Pituus 230 cm filt



Potilassuojaus pelastuspaariin

Ferno-potilassuoja suojaa potilasta sateelta, tuulelta ja lumelta. Tarjoaa helpon pääsyn potilaaseen ja tilan seuraamiseen kaksinkertaisen vetoketjullisen keskiaukon kautta. Kevyestä nylonista valmistetussa kannessa on kaksinkertainen vetoketju, joka aukeaa molemmista päistä. Potilassuoja voidaan rullata tai taittaa ja säilyttää erillisessä säilytyspussissa. Ja, joka voidaan helposti kiinnittää paariin integroiduilla tarranauhalla.

Art.Nr TR150130

Evakointipatja Minitranz



Minitranz on erinomainen apuväline ihmisten liikuttamiseen, erityisesti ahtaissa tiloissa, joihin pääsy on vaikeaa. Se vie vähän tilaa ja on hyvä ergonominen apuväline parantamaan työvaiheita eri tilanteissa. Alapuoli on vahvistettu, ja sitä voidaan vetää. Hygieeninen ja helppo pitää puhtaana. Hyvä apuväline kaikkialla ja se soveltuu erittäin hyvin sujuvaan siirtoon pelastuspaareille ja -paareilta.

Art.Nr GE70050

Kork 1,5 cm

Leveys 76 cm

Pituus 136 cm


Pain 1,8 kg

Max kapasit 250 kg

Paariensuoja pelastuspaareille

Traverse päällinen suojaa pelastuspaareja ulkoisilta ympäristövaikutuksilta. Siinä on runsaasti tilaa peittojen ja muiden paritarvikkeiden säilytykseen, ja siinä on kuusi vahvistettua kantokahvaa ja kaksi kiristyshihnaa. Valmistettu polyesterivahvisteisesta PVC-vinyylistä. Kaikki saumat ja vetoketjut ovat kaksoisommeltuina. Päävetoketju on vahva kierrevetoketju. Ja siinä on kaksi liukusäädintä, jonka ansiosta yläläppä avautuu kokonaan. Sopii useimpiin täyspitkiin pelastuspaareihimme

Art.Nr TR05044

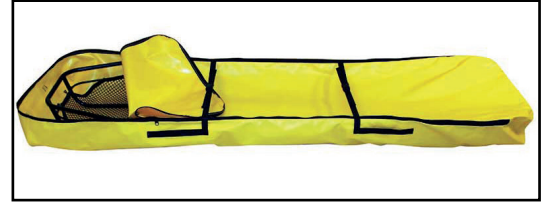

Paariensuoja pelastuspaari

Traverse-paarin päällinen sopii useimpiin jaettavissa oleviin pelastuspaareihimme

Art.Nr TR050145



Varastosuoja pelastuspaareille F071

Suojaus on suunniteltu FERNO-malleille F071 ja F071M pelastuspaareille.

Art.Nr F387A



Päänsuoja pelastuspaariin

Suoja potilasta lisävammoilta pelastusoperaation aikana! Suojaa putoavilta kiviltä ja roskilta sekä huonolta säältä vaarantamatta pääsyä ja näkyvyyttä potilaan päähän. Valettu paksusta Lexanmateriaalista, joka tarjoaa iskunkestävyyden mutta lasin kirkkauden. Luotettava tuote, jota käytetään ympäri maailmaa. Pikaliitin, jolloin suoja voidaan tarvittaessa poistaa nopeasti.

Päänsuojaus vaatii mukautetun kiinnityksen, joka on tilattava erikseen parimallin mukaan.

CMC740012 Kiinnike päänsuojukseen F071:lle, 35mm

CMC740016 Kiinnike päänsuojalle Titan-paareille, 25mm

CMC740017 Kiinnike päänsuojalle Advantage-paareille, 22mm



Art.Nr CMC740000

Pain 1,4 kg

Easy Lift Shoulder



Easylift Shoulder on apuväline, joka on kehitetty helpottamaan parien kantamista. Easylift on helppokäyttöinen ja ainutlaatuinen ominaisuuksiltaan, jotka tekevät tästä tulevaisuuden apuvälineen. Easyliftissä on kitkalukko, joka hyvän tukevan otteen ja samalla mahdollistaa nopean irroituksen, jos tapahtuu odottamaton tilanne. Monet käyttävät ambulanssissa henkilökohtaisina valjaina, jotka ovat aina valmiina kun tarvitaan raskaisiin nostoihin!

Art.Nr GE1500000016

Pain 0,4 kg

Ferno Easy Handle 4-kit



Ferno Easy Handle, yksinkertainen ratkaisu, joka tekee suuren vaikutuksen. Easy Handle on ergonominen apuväline, joka on suunniteltu käytettäväksi pelastusparien, minipaarien, tyhjiöpatjojen, Scoop-parien ja muiden nostamiseen. Yksinkertaisesti kaikkialla, missä sinun täytyy saada hieman parempi ja ergonomisempi ote.

Easy Handle mahdollistaa ergonomisemman noston polven korkeudelta.

Ferno Easy -kahvasarjassa on 4 nostohihnaa ergonomisilla kahvoilla, jotka on pakattu käytännölliseen pussiin.

Art.Nr GE1500000034

Pituus 40 cm

Pain 0,45 kg

Max kapasit 250 kg

Sherpa-hihna pelastuspaareille

Sherpa-hihnan pituus on säädettävissä yksilöllisesti sopivaksi, ja se on suunniteltu antamaan pelastajalle mahdollisuuden jakaa paino kun halutaan helpompaa ja ergonomisempaa liikkumista. Sherpa-hihnaa voidaan käyttää sellaisenaan tai yhdessä pelastuspariemme kahvojen kanssa.




Art.Nr TR150145



Reppuvaljaat Titan jaettavalle pelastusparille

Jaettavien parien reppuvaljaat ovat yksinkertainen, kevyt järjestelmä jaettavien pelastusparien kantamiseen maastossa. Valjaat on valmistettu vinyylipäällystetystä polyesterikankaasta/verkosta ja sisältävät muoviset sivusoljet sekä pehmustetut olka- ja vyötäröhihnat. Sopii kaikkiin Titanin jaettavissa oleviin pelastuspaareihin. Säädettävä yksilöllisesti sopivaksi.

Art.Nr F102916001

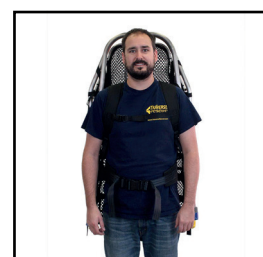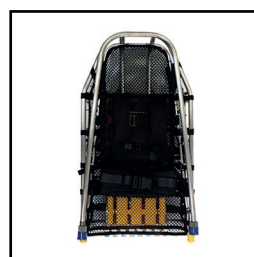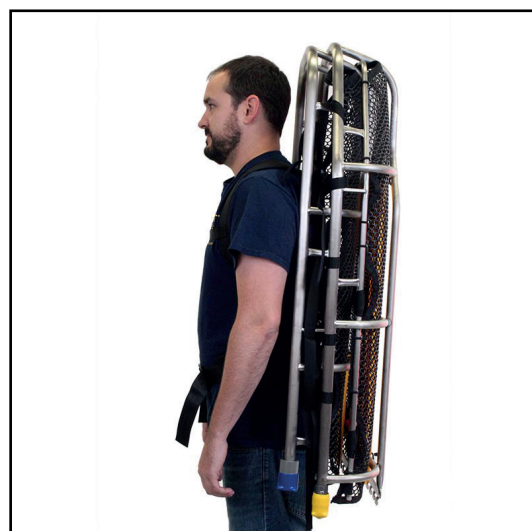



Kädensijat Traverse pelastuspaariin

Kantokahva, joka sopii kaikkiin Titan- ja Gazelle-pelastuspaareihin. Helpottaa ergonomista liikkumista ja on helppo kiinnittää.

Art.Nr TR150240

Vikt 1 kg

Reppu pelastuspaareille



Art.Nr TR050146-TAN

Kork 19 cm

Leveys 60 cm

Syvyys 28 cm

Nostoliinat Soft Eye



Soft Eye -nostoliina on tarkoitettu Traverse-pelastuspaariemme nostamiseen. Soft Eye pystyy sekä pysty- että vaakasuuntaiseen nostoon. Vahvasti ommeltuja silmukoita jokaisen hihnan päässä. Kaikissa neljässä hihnassa käytetyt laskuvarjosoljet mahdollistavat niiden säätämisen itsenäisesti.

Pelastusparit voidaan helposti asettaa parhaaseen kulmaan tilanteesta riippuen. HUOM! Käytä nostoliinoja vain yhdessä pelastuspaareiden kanssa. TR200015

Art.Nr TR150106

Vikt 1,3 kg

Max kapasitet 22 kN 2272 kg

Nostoliinat Hard Eye



Hard Eye -nostoliinat on tarkoitettu Traverse-pelastuspaariemme nostamiseen. Hard Eye pystyy sekä pysty- että vaakasuoraa nostoa. Teräksinen D-rengas jokaisen hihnan päässä. Kaikissa neljässä hihnassa käytetyt laskuvarjosoljet mahdollistavat niiden säätämisen itsenäisesti. Pelastusparit voidaan helposti asettaa parhaaseen kulmaan tilanteesta riippuen.

Art.Nr TR150105

Vikt 1,5 kg

Max kapasitet 22 kN 2272 kg

Hoitoreppu alpin Kigali 45 L

Ammattimainen reppu, joka on alun perin suunniteltu hiihtopartiolle, Kigali-reppu on nopeasti tullut suosituksi SAR:ssa, poliisissa ja terveydenhuollossa.

Valittavana on kaksi eri kokoa, joten Kigali sopii melkein kaikkiin skenaarioihin. Molemmat reput ovat ulkoasultaan samanlaisia, ja niissä on kaksi ulkoista taskua, joissa on kaksinkertaiset joustavat lenkit ja taskut pienten tavaroiden järjestämiseen. Suuressa pääosastossa on ylimääräisiä lokeroita suuria sidoksia varten. Siinä on tarpeeksi tilaa pienille peitteille ja siteille.

Saatavana myös 35 litran kokoisena TR200035

Art.Nr TR200045

Kork 59 cm

Leveys 38 cm

Pain 2,2 kg



Vyötärölaukku alpin Cirque 1

Joustava vyötärölaukku hillityllä muotoilulla, johon mahtuu useimmat tavarat älykkäiden lokeroitensa ansiosta. Laajasti hiihtopartioiden ja erikoisyksiköiden käytössä, toimitetaan tyhjänä, mutta voidaan täydentää varusteilla. Edessä tasku. Pehmustettu ja mukava käyttää.

Art.Nr TR200070BK

Kork 22,9 cm

Leveys 7,6 cm

Pituus 35,5 cm



Vyötärölaukku alpin Cirque 2

Joustava vyötärölaukku hillityllä muotoilulla, johon mahtuu useimmat tavarat älykkäiden lokeroitensa ansiosta. Hiihtopartioiden ja erikoisyksiköiden käytössä paljon, toimitetaan tyhjänä, mutta voidaan täydentää varusteilla. Kaksi taskua edessä. Pehmustettu ja mukava käyttää.

Art.Nr TR200080BK

Kork 28 cm

Leveys 10,2 cm

Pituus 38 cm



Tripod Eagle Nest 3



Tripod Eagle Nest 3 on järjestelmäratkaisu, jota voidaan käyttää myös Bipodina!

Koska se on valmistettu kokonaan titaanista, sen kokonaispaino on 22 kg ja se voidaan pakata kahteen erilliseen reppuun, se on ilmeinen ratkaisu pelastustehtäviin maastossa.

Se kuuluu siirrettävien kiinnityspisteiden luokkaan ja on sertifioitu standardin EN 795: 2012 - "Henkilökohtaiset putoamissuojaimet - Ankkurilaitteet" - mukaisesti. Yksikön vankka rakenne yhdessä sen kevyen painon kanssa takaa äärimmäisen luotettavuuden yhdistettynä helppoon asennukseen, sen voi koota ja purkaa kokonaan yhden käyttäjän toimesta. Leveä perusaukko 2x2x2 m takaa korkean vakauden ja suuren työskentelyalueen.

| | |
|------------------------|--------------|
| Art.Nr | F210150007 |
| Max kork | 2,7 m |
| Pain | 22 kg |
| Max lastkapasit | 300 kg |
| Certifering | EN 795: 2012 |



arachnipod



Arachnipod Standard Tripod
Art.Nr. FAPOD-STD



Arachnipod Advantage Tripod
Art.Nr. FAPOD-ADV



Arachnipod Quadpod
Art.Nr. FAPOD-QUAD

Harkittu, ainutlaatuinen muotoilu ja vankka tekniikka tekevät Ferno Arachnipodista maailman monipuolisimman modulaarisen järjestelmän!

Yksikkö voidaan sovittaa useisiin eri kokoonpanoihin, mukaan lukien gin-pylväs/monopoli, bipod, kolmijalka, quadpod ja siltajärjestelmä toimimaan erilaisissa pelastustilanteissa. Sen monipuolisuus tekee siitä ihanteellisen järjestelmän monien alojen työntekijöille mm. pelastus, ensihoito, jne.



Arachnipod Standard Bridge
Art.Nr. FAPOD-S-BRIDGE





Vuodesta 1983 lähtien me Ferno Nordenissa olemme tehneet tiivistä ja kehittyvää yhteistyötä asiakkaidemme kanssa. Laitteitamme käytetään päivittäin toiminnassa, jossa turvallisuus, laatu ja toiminta ovat korkeat. Pääasiakkaitamme ovat ambulanssi, pelastuspalvelu, poliisi, väestönsuojelu ja puolustusvoimat. Nykyään kasvamme myös teollisuudessa, julkisissa ympäristöissä, terveydenhuoltolaitoksissa ja yksityisillä markkinoilla. Yrityksellä on ISO-sertifioitu ympäristö 14001:2015 ja laatu 9001:2015.

| LAND | TELEFON | E-POST | WEB |
|---------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|
| SWEDEN | +46 520 420 200 | fab@fernonorden.com | www.fernonorden.se |
| NORWAY | +47 33 03 45 00 | fno@fernonorden.com | www.fernonorden.no |
| DENMARK | +45 43 62 43 16 | fas@fernonorden.com | www.fernonorden.dk |
| FINLAND | +358 (0)29 1700 454 | foy@fernonorden.com | www.fernonorden.fi |